


ニュースキットチップ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

※ 接続部内径：φ10mm または φ11mm

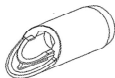

2. 原材料

熱可塑性エラストマー（TPS）

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結し、口腔内に貯留する水分や切削片を除去する。

【使用方法等】

- 1）使用前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（設定温度：121℃、滅菌：20分、乾燥工程有）
- 2）歯科用吸引器にしっかりと接続しているかどうか確認し、適時吸引を行う。
- 3）使用後は直ちに洗浄を行う。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 使用前にキズ、バリ、ゆるみがないか確認の上、操作すること。
3. 使用前に必ず、本品が歯科用吸引器にしっかりと接続されているか確認すること。
4. 器具に対して、形状変更・打刻（打印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。
3. フェノール系の消毒液で消毒後、紫外線殺菌を行うと著しく変色することがあるので注意すること。

【保守・点検に関わる事項】

【洗浄】

- ・血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなるので、ただちに洗浄、滅菌を行うこと。
- ※ クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

【滅菌】

- ・オートクレーブ滅菌推奨。
但し、オートクレーブ時は外力が掛からないようにすること。またバキューム管は外すこと。
- ・アルコールを使用した高圧滅菌、感熱滅菌不可。
- ・使用する薬液の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

三晃合成工業株式会社

住所：愛知県名古屋市長穂区神穂町4-7

電話番号：052-811-1232

ニュースキットチップ

一般医療機器：再使用可能な歯科用吸引カニューレ
届出番号：23B3X10025000003
三晃合成工業株式会社
愛知県名古屋市長区神穂町4-7
TEL：052-811-1232
内容量： 10 個

特許取得済

Made in Japan

※ A4添付文章が必要な方は、製造販売業者までご連絡ください。