

再使用禁止


【禁忌・禁止】
再使用禁止**【形状・構造及び原理等】**

1. 種類

(1) 足首用



(2) ひじ用

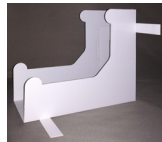

(3) 手首・指用



(4) アキレス腱・延長用



(5) くび用: Lsize/Ssize



(6) 付属品



Lsize

Ssize

布バンド

緩衝材

本品は、単品で製造販売される場合もある。

2. 構造

本品を構成する材料は、以下のとおり。

構成	原材料
本体シート	ダンボール
固定テープ	フィルム法合成紙またはナイロン
緩衝材	ウレタンフォーム
面ファスナー	ナイロン
【付属品】	
布バンド	綿、レーヨン
緩衝材	発泡 PE

3. 原理

患者の患部固定用に使用される副木である。

【使用目的又は効果】

本品は、損傷した身体部位を固定するために用いる器具であり、身体に合うように予め成形されている。

【使用方法等】

- ① 固定する部位・症状に合った本品を選択する。
- ② 組立方法に従って組み立てる。
- ③ 本品と固定する部位に隙間がある場合、付属の緩衝材を用いて隙間を埋めて患部を固定する。
- ④ 2関節間を固定する場合は、延長を用いる。
- ⑤ 固定テープにより患部を固定する。

<組立方法及び装着状態>

(1) 足首用




①を差し込んだ後に②を差し込む。

組み立て状態

装着状態

(2) ひじ用

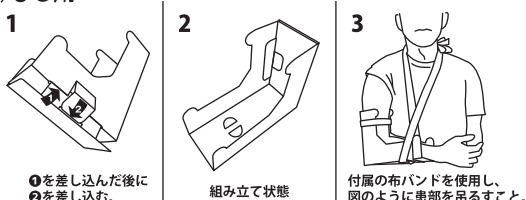


①を差し込んだ後に②を差し込む。

組み立て状態


付属の布バンドを使用し、図のように患部を吊るすこと。

(3) 手首・指用

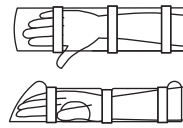

(4) アキレス腱・延長用

・アキレス腱を固定する場合

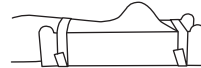

・足首用に延長(接続)する場合




(5) くび用



患者の体型に応じてLsize/Ssizeを選択する。

(6) 付属品の使い方

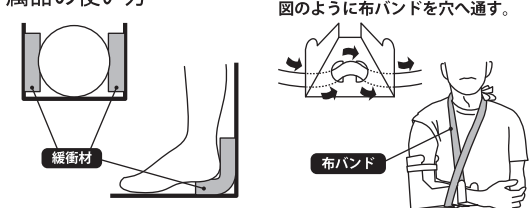

図のように布バンドを穴へ通す。

緩衝材

布バンド

【使用上の注意】

- 1) 損傷部位に出血がある場合、必ず先に患部の止血措置を行うこと。
- 2) 固定措置後、速やかに医師の診断を受けること。
- 3) 固定テープによる固定がゆるい場合には、その他の手段(三角巾、ネクタイ、バンダナなど)でしっかりと固定すること。
- 4) 皮膚が赤みを帯びたり、しびれ感があったり、腫れ上がった場合は使用を中止すること。
- 5) 身体と本品に隙間がある場合、付属の緩衝材その他の手段で隙間を埋めて固定すること。
- 6) 必要に応じてアイシングを行うこと。
- 7) 本品の装着によって、呼吸や飲み込みが妨げられたり、下顎、鎖骨、後頭部、肩等に痛みが生じた場合使用を中止すること(くび用)。
- 8) 付属の布バンドを本品に取り付け孔に通して使用し、患部を吊るすこと(ひじ用)。首に痛みがある場合、布バンドと首の間に緩衝材かタオルを挟むこと。
- 9) アキレス腱断裂の可能性がある場合、足首用を使用せず、アキレス腱用を使用すること(足首用、アキレス腱用)。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管時は水濡れ厳禁、火気厳禁。直射日光及び高温多湿を避けること。

【取扱上の注意】

- 1) ダンボールの裁断面でのけがに注意すること。
- 2) 本品に破損、変形、汚染等がある場合、使用しないこと。
- 3) 本品に水がかからないように注意すること。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：有限会社サンパック
〒682-0835 鳥取県倉吉市長坂町 722-1
電話番号：0858-28-5461 FAX：0858-28-3838