

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品を使用して採取した血液を人体に戻さないこと。（採取した血液の安全性が確保できていないため。）

【形状・構造及び原理等】

本品は、採血に用いる開放型採血用チューブである。ランセット等で皮膚を穿刺し、漏出した血液を採取するための採血管があり、一定量の血液とするためにフィルターが内蔵されている。又、採取した血液を注入・滴下するためにピストンを備える。

* 本品は、採取量 10～200 μ l を採取できる 6 タイプがある。

* 添加物の種類: 添加物なし、ヘパリンリチウム、K3-EDTA

<形状・構造>




体に接触する部分の原材料: 酢酸プロピオン酸セルロース

【使用目的又は効果】


本品は、血液検体の採取、注入・滴下に用いる。

【使用方法等】


1. 穿刺した指先から毛細管現象を利用して採血する。
※ピストンに触れないように製品本体を持ち、水平に保持しながら採血すること。

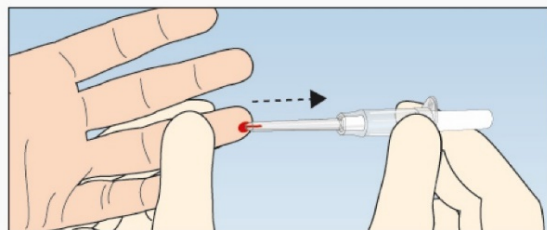

2. フィルターまで達すると規定量の採血は完了となる。

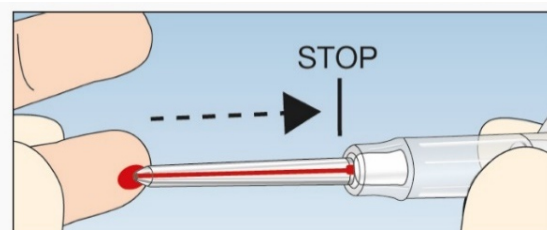

3. 空気穴を塞ぎながらピストンを押すことで、プレート又はチューブに採取した血液を注入・滴下する。

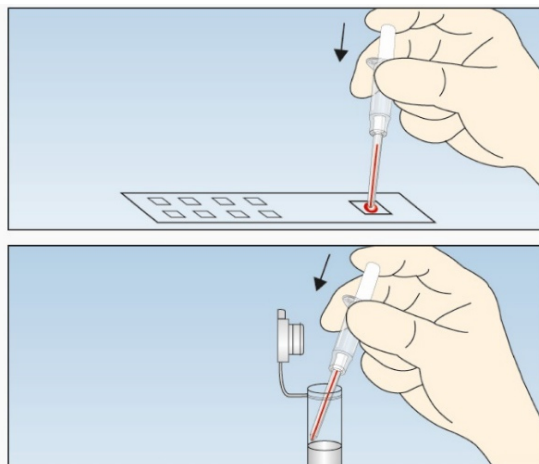

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品にバリ、傷、割れ、その他有害な欠点が認められた場合は、本品を使用しないこと。
- 2) 採取前にピストンを押さないこと[ピストンが既定の位置にない場合、規定量を注入・滴下できない場合がある。]
- 3) 穿刺するためのランセット等は、採血量に応じた適切なものを使用すること。
- 4) 採血部位にランセット等で穿刺する前に、採血部位を温めること。
[採血部位を温めることで血液循環を増大させるため。]
- 5) ランセット等を穿刺し漏出した1滴目の血液は滅菌ガーゼなどでふき取ること。[組織液の影響で正確な検査結果を得られない可能性がある。]
- 6) 採血部位に連続して強い圧力をかけないこと。[溶血や、血液に組織液の混入の原因となる可能性がある。]
- 7) 適切な量の血液を採取すること。
- 8) 採血管の先端を体内や穿刺部位に接触して使用しないこと。
- 9) 採血及び検体を取り扱う際には、血液と直接触れないように対処し、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて室温で保管すること。

<有効期間>

有効期限は外箱またはラベルに記載。（自己認証による）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 : ザルスタット株式会社
電話番号 : 03-3526-3530（代表）
外国製造業者 : SARSTEDT AG & Co. KG（ザルシュテット）
国名 : ドイツ