

機械器具（47）注射針及び穿刺針

再使用可能な眼科用カニューレ

I/A ハンドピース

一般医療機器（I）

【禁忌・禁止】

1. 磨耗、傷、清掃不良品の再使用禁止
2. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。誤った使用方法は本品の破損を招く恐れがあるため。
3. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。振動・切削・打刻等により製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因となるため。

【形状・構造等】

本品は、眼科白内障手術において、水晶体を乳化吸引後、その核や皮質を吸引排出する器具です。前房内に挿入して用います。
ステンレス製です。


《形状図》 I/A ハンドピース



直 曲

金属スリーブ曲

シムコ

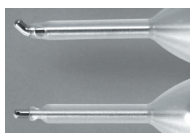

金属スリーブ直



ピンクホルスト



TAKAHASHI



バイマニユアル 直と曲



【性能、使用目的、効能又は効果】

本品を超音波乳化吸引白内障手術装置に接続して使用します。水晶体を乳化し、吸引排出できます。

【操作方法又は使用方法等（用法・用量を含む）】

1. 使用前に滅菌し、その後、使用すること。
2. 滅菌方法は、高圧蒸気滅菌（126 度で 15 分間）により行うこと。

＜注意＞

1. 本品使用後 30 分以内に清水をカニューラに通水して、清掃をすること。滅菌は、この後に行うこと。
2. 先端をぶつけないで下さい。変形すると性能が劣化します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 製品に傷や揺るぎ等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 購入直後の新品性能が出ないものを繰り返し使用しないこと。
3. 使用後の廃棄は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

使用期間等

最大 100 回で交換すること。

【包装】

1 本／箱

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造業者又は製造販売業者：
サイメンデザイン有限会社
東京都足立区千住曙町 41-1-2902
電話 03-3870-9230