

機械器具 14 打診器

一般医療機器 打診器 (11950000)

MDF 打診器

【禁忌・禁止】

1. 本製品を改造、分解しないでください。
2. 製品が破損するおそれがあるので、折り曲げないでください。
3. 使用前は製品に破損がないか確認し、破損又は破損のおそれがある場合は使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】

弾力性のある PVC 又はシリカゲルのヘッド、金属又は ABS 樹脂又はナイロン製のハンドル及び触覚ブラシ（一部を除く）から構成される。

形状

(代表例)

MDF505

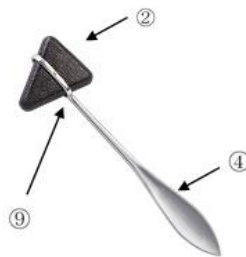

②ヘッド ④ハンドル ⑨固定軸

MDF515PBT

①マレット ②ヘッド ③柄
④ハンドル ⑤触覚ブラシ ⑥触覚ブラシ柄

原理

手操作によりヘッドで腱等に刺激を与える。

【使用目的又は効果】

ハンドル、軸及びヘッドからなる金属製又は ABS 樹脂又はナイロン製の器具をいう。反射を検査するため身体に力を伝達するために用いる。ハンドルは手のひらに適合するように設計され、丸く軸に向かって先細になり、この軸の先端にヘッドがある。本品は神経学的検査に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前
 - ① 本品全ての部品が確実に且つ適切に接続されていることを確認する。
 - ② 必要に応じて洗浄又は清拭する。
2. 使用方法
 - ① 打診部を検査部位にあてがい、ハンドルを手で操作してたたき、患者の反応を観察する。
 - ② 触覚ブラシは検査部位の皮膚に当て、異常の有無あるいはその強弱をはかる。
 - ③ 本製品は胸部や腹部等の打診に用いることもある。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外で使用しないこと。
2. 健常な皮膚以外に本品をあてないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、直射日光、高温多湿、水濡れ等避け保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 毎回使用前に本品全体の汚れた部分を拭き取る。
2. 本品全部品のお手入れには、イソプロピルアルコール液又は中性洗剤と清潔なコットン製の布を使用する。
3. 本品を過度の熱、冷気、溶剤、湿気及び油/(皮膚から分泌される)脂質に長時間さらさないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

サンタメディカル株式会社

〒174-0072

東京都板橋区南常盤台一丁目 11 番 7 号 MT ビル 302

TEL：03-5926-9520

製造業者：

MDF Instruments Medifriend Inc. (中国)

取扱説明書を必ずご参照ください。