


機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)

ジーシー CD ディスペンサーⅢ

【形状・構造及び原理等】

材質：ポリアセタール、アルミニウム、ステンレス鋼、
PA/ABS 樹脂

形状：

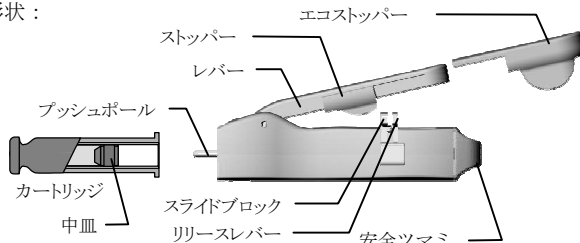


【使用目的又は効果】

専用のカートリッジを装着し、カートリッジ内のペーストの必要量を所定の比率で採取する。

【使用方法等】

- 1) カートリッジの着脱は、プッシュボールが完全に CD ディスペンサーⅢ内部に引き込まれた状態で行います。プッシュボールが本体から出ている場合は、レバーを開き、スライドブロックとリリースレバーを強くつまんだ状態で後端部まで引き戻して、プッシュボールを完全に本体内部へ引き込みます。

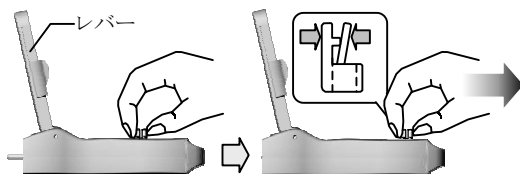

- 2) CD ディスペンサーⅢにカートリッジを装着する際は、
① CD ディスペンサーⅢ嵌合部の▲マークと、カートリッジの▲マークを合わせます。
② ▲マーク同士を合わせた点を中心にして、回転させながら装着します。(最後まで回しきったことは、クリック感で確認できます。) カートリッジを外す場合は、この逆です。
3) カートリッジにキャップをしたまま、リリースレバーの付け根部分を押し、プッシュボールの先端をカートリッジの中皿に突き当てます。リリースレバーのできるだけ下部を押すと、スムーズにスライドできます。
4) CD ディスペンサーⅢの「安全ツマミ」に刻印された矢印を上向きの位置に 90 度回転させるとレバーが上がり、押し出し操作ができるようになります。(それ以外の位置では、レバーによる押し出し操作はできません。)



「安全ツマミ」を回す際には、レバーを押さえないでください。

- 5) カートリッジのキャップは、引き抜くように外します。この時、カートリッジの装着状態にズレのないことを確認します。
6) CD ディスペンサーⅢのレバーを押してペーストを押し出し、練和紙に採取します。ストッパーをスライドさせ、位置を変えることにより、押し出し量を変えることができます。レバーを押したまま、ペーストをすり切ります。
7) 特定の CD カートリッジ製品を押し出す場合、エコストッパーを装着することにより、押し出し量をより少なく調節できます。エコストッパーは、CD ディスペンサーⅢのレバー後方より抜き差しすることで着脱を行います。(正しい位置に装着できたかは、クリック感で確認できます。)

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 左右のペーストの計量が適切にできないことがあるため、カートリッジを確実に装着すること。
2) カートリッジを装着後、最初の 1 回目はペーストを押し出してすり切り、ペーストの左右のバランスを合わせる。
(2 回目以降のペーストの押し出し量は、適切な標準比で行えます。)

- 3) ペーストのすり切りは、レバーを押したまま行うこと。
(レバーを離してすり切ると、ペーストがカートリッジ内に吸い戻されるため、左右のペーストの計量が適切にできないことがあります。)
- 4) カートリッジを外す際は、スライドブロックを後端部まで引き戻し (プッシュボールを引き込み)、その後カートリッジを左回転させて外すこと。
5) カートリッジの装着方向は、いつも同じ向きになるようにすること。(装着方向が変わると、左右のペーストの計量が適切にできないことがあります。▲マークを合わせることににより、方向を規定できます。)
- 6) CD ディスペンサーⅢには、注油しないこと。
(注油するとプッシュボールが滑り、カートリッジのペーストを押し出すことができなくなることがあります。)
- 7) カートリッジを装着したまま CD ディスペンサーⅢを落下させると、カートリッジを損傷することがあるので、注意すること。
8) スライドブロックを移動させる時の指のかけ方が、前方と後方で異なるので注意すること。
9) レバーを上げたまま CD ディスペンサーⅢを落下させると、内部部品を損傷することがあるので、使用後は安全ツマミを回してレバーを下げておくこと。
10) 左右のペーストの計量が適切にできないことがあるため、特定の CD カートリッジ製品以外では、エコストッパーを使用しないこと。(特定の製品については、エコストッパー添付の「使用上の注意」をご確認ください。)

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
① CD ディスペンサーⅢは、オートクレーブ、ケミクレーブによる滅菌は行わないこと。
② 操作性の低下、錆発生のある恐れがあるため、薬液浸漬による洗浄・消毒は行わないこと。(表面の清掃は、消毒用エタノールを染み込ませたガーゼなどで拭くことをお勧めします。)
- ③ 本品の操作中、レバーと本体の間に手を挟まないように注意すること。
④ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑤ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑥ 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症を起こした時は、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
2) 本品とヨードチンキに代表されるハロゲン元素を含む薬品とは、変色・変質することがあるので、同じ場所に保管しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 シオダ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：(お客様窓口) 0120-416480