

機械器具 2 4 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 歯科用咬合力計（70699000）
特定保守管理医療機器

オクルーザー（型式：デンタルプレスケール）


再使用禁止（デンタルプレスケール）

【禁忌・禁止】

再使用禁止（デンタルプレスケール）

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

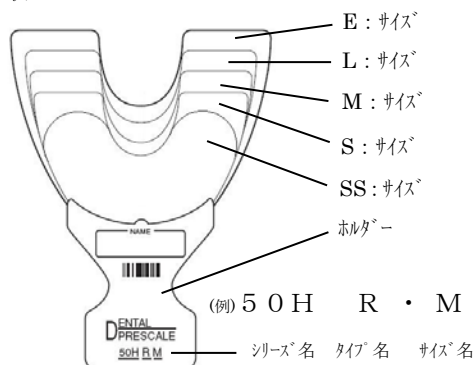

Rタイプ：フィルムのみ（咬合力が認識できる）

Wタイプ：フィルムの両面にワックス付（咬合力と歯列形状が認識できる）

E：顎変形および第三大臼歯が対合している人

L：成人男性

M：成人女性

S：小児

SS：幼児

2. 原理

患者に咬合させたデンタルプレスケールはその咬合圧に応じ赤色濃度をフィルム内に発色する。これをオクルーザーシート（またはオクルーザーシートWタイプ用）の上に載せ、オクルーザーカセットにセットして読み取る。読み取ったデータを圧力値に換算しモニタ上に表示する。

【使用目的又は効果】

顎関節症等の神経筋機能障害による咬合圧の分布異常や不均衡を検出する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。
- 1) 患者を正規の姿勢にし、極力唾液等がつかないように口腔内に入れる。
- 2) 臼歯部からゆっくりと噛み合わせ、デンタルプレスケールを固定する。
- 3) 全体にゆっくりと噛み合わせて全体を固定し、患者に一気に力を入れさせる。
- 4) その後、患者にゆっくりと力を抜かせ、口を開かせデンタルプレスケールを口腔内から取り出す。
- 5) 付着した唾液等をきれいに拭き取る。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。
- 1) 使用前に押さえたり、こすったり、たたいたりしないこと。
- 2) 口腔内に異物が残ったときは、うがいなどで除去すること。
- 3) 一度使用した物は再使用しないこと。

4) 使用済みの物、不必要な物は、医療廃棄物として処理すること。

5) Wタイプは、35～40℃に暖め、ワックスを軟らかくしてから使用すること。

6) ホルダーに印刷されているバーコードや文字にアルコール等の溶剤や消毒液を接触させないこと。印刷がにじみ、オクルーザーでの読み込みが不能となる可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

・未使用の物も使用後の物も保存は、下記の注意事項を守ること。

1) 保存中は下記の物に接触させないこと。

ジアゾコピー紙及び袋、裏カーボン紙、油、溶剤、セロハンテープ類、ゴム製品類

2) 使用後の物を長時間（3日間以上）保管する場合、発色濃度が徐々に変わるので、唾液等を充分拭き取った後、冷蔵庫などの冷暗所に保管すること。

3) 発色濃度は、紫外線で変化するので長時間の直射日光（10分以上）や、蛍光灯照射（3時間以上）は避けること。

2. 使用期限

正規の方法で保存された物に限り、製造後、2年間とする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480

使用説明書を必ずご参照ください。