


機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具(38782000)

ジーシー EMディスペンサー

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

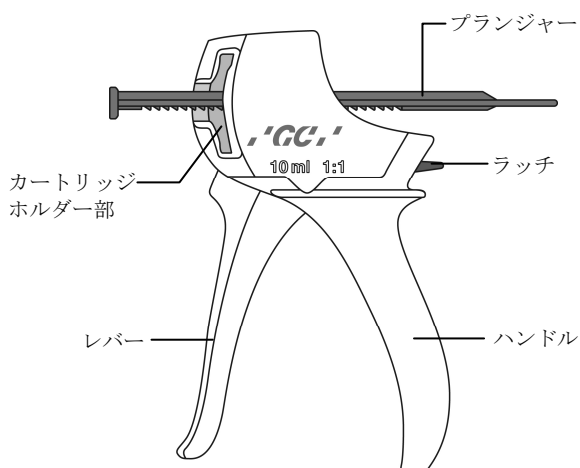

組成：

- 本体（レバー・ハンドル等）：
ガラス繊維強化ポリサルフォン樹脂
- プラランジャー：
ポリフェニレン樹脂
- ラッチ：
ポリアミド樹脂

原理

レバーを握ると、プラランジャーが繰り出され、カートリッジ内のペーストを押し出す。


【使用目的又は効果】

本品は、ジーシー EMディスペンサーに対応した各種製品の練和物の押し出しに使用する。

【使用方法等】

1) 前準備

- ①ディスペンサーのラッチを押し上げて、プラランジャーを手前一杯まで引きます。
- ②ジーシー EMディスペンサーに対応したカートリッジを、底部のU字溝のある側を上にしてカートリッジホルダー部に装着し、固定します。

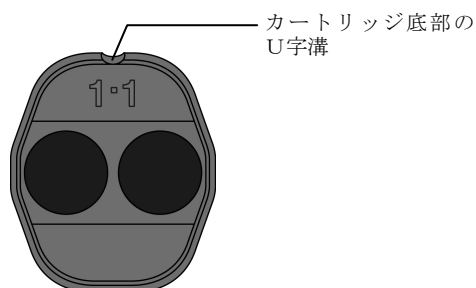

- 2) ラッチを押し上げて、プラランジャーがカートリッジとかみ合うところまで手で押し込みます。

- 3) 各種カートリッジ製品の添付文書に従い、2つのペーストの先端を合わせ、ミキシングチップを装着します。
- 4) レバーを数回握り、カートリッジ内のペーストを押し出します。
- 5) カートリッジを取り外す際は、ラッチを押し上げてプラランジャーを手前一杯まで引き、カートリッジホルダー部からカートリッジを取り外します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) カートリッジ及びミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから、押し出し操作を行うこと。
- 2) 本品を用いる場合、レバーに手指を挟まないように注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
①消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
②材料を急激に押し出すと、カートリッジが割れる場合があるので、静かにレバーを握ってカートリッジ内のペーストを押し出すこと。
③ディスペンサーの樹脂部は 132℃を越えると変形する恐れがあるので、滅菌器の温度を 132℃を越えて上昇させないこと。
④清掃液、消毒液、滅菌器については、各業者の指示に従い正しく使用すること。
⑤オートクレーブでの滅菌後は、本品が完全に冷えてから使用すること。
⑥本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑦本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑧本品は、絶対に分解、改造を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

使用後、洗剤を用いて洗浄し、使用前と同条件で滅菌する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480