


機械器具 6 0 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用真空攪拌器(70742000)

ジーシー バキュームミキサー VM-II

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

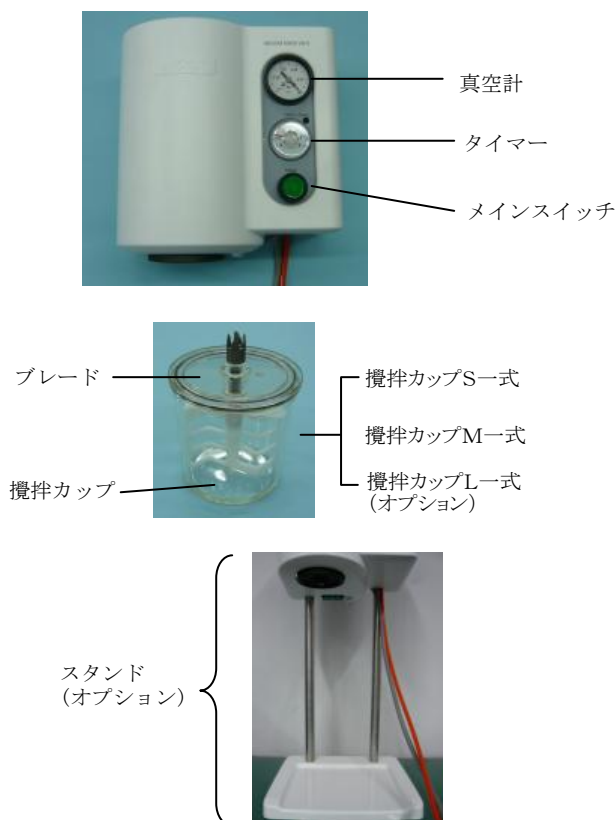

2. 電気的定格

電源電圧：AC100V 50/60Hz
電源入力：190VA
電撃に対する保護の形式：クラス I 機器

3. 原理

石こう・埋没材を気泡や練り残しがない均一の練和物を得るために、真空状態にて攪拌する装置である。

【使用目的又は効果】

減圧下で埋没材又は石膏の粉末を水と練和する。

【使用方法等】

1. 設置方法

- 1) 本装置の設置方法については、付属の使用説明書に従い行うこと。
- 2) 本装置は精密機器のため、安定したところに設置すること。オプションのスタンドに取り付ける場合は、自動練和器などの振動をとまなう機器のそばには設置しないこと。

2. 使用方法

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

- 1) タイマーをセットする。
- 2) 攪拌カップに水(液)と粉末を入れ、スパチュラで予め練和し、水(液)と粉末を充分になじませてからブレードを装着する。
※各々攪拌カップの練和可能な粉末の量は以下の通り。
S：25～150g
M：150～400g
L：250～600g
- 3) カップを本体吸着面に真っすぐにセットし、カップを支えたままメインスイッチを押す。
攪拌が始まると同時にカップ内は真空状態になり、カップは本体に吸着される。(メインスイッチが点灯し、タイマー右上の赤色のランプが点滅する)
- 4) 攪拌が終了するとタイマー右上の赤色のランプが点灯する。
- 5) カップを支えメインスイッチを押す。真空状態は解除され、本体から外れる。

※攪拌を途中で中止したい場合には、使用方法の 5) に準じて行うこと。

3. 使用環境

本装置は周囲温度が 10～40℃の環境下で使用する。

【使用上の注意】

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

1. 歯科医療有資格者以外は本装置を使用しないこと。
2. 分解、改造は絶対しないこと。
3. 水(液)と粉末は攪拌前に必ずなじませること。練和不足の原因になります。
4. 攪拌終了後は、カップ、ブレード、Oリング等、練和物が付着している部分は速やかに清掃すること。
5. フィルターが詰まったり、Oリング部に練和硬化物等が付着していると正常な真空状態が得られません。真空計で 0.08MPa 以下になった場合はそれぞれ清掃すること。(フィルターの清掃は使用説明書「お手入れの方法」を参照のこと)
6. 使用説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
7. タイマー右上の赤色のランプが点滅している時は、モーターが回転しており怪我をする恐れがあるので、カップ吸着面、ブレードに手を触れないこと。また、内部部品の連続動作による機器の異常発熱および練和物の硬化を防止するため、練和の終了を警告するタイマーのランプが赤色点灯に変わり次第、速やかにメインスイッチをOFFにし、機器の動作を止めること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 周囲の温度が-10℃～50℃であること。
- 2) 周囲の湿度が 30%～75%であること。
- 3) 周囲の気圧が 700hPa～1060hPa であること。
- 4) 水のかからない場所に保管すること。
- 5) 温度、湿度、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 6) 風通しの良い場所に保管すること。
- 7) 傾斜のない、また振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること。
- 8) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 耐用期間

- 1) 正規な保守・点検を実施した場合に限り、製造出荷後 10 年とする。[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
詳細については付属の使用説明書に従い行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー
発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480