


機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
ジーシー フジルーティング CD プランジャー

【形状・構造及び原理等】

形状：

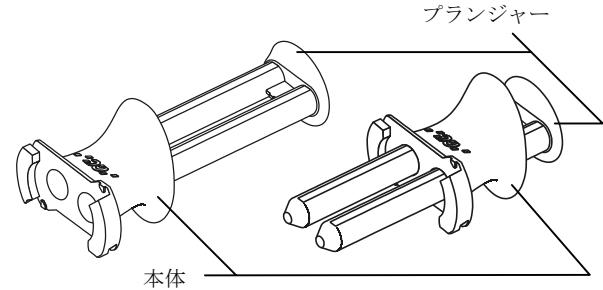

材質：

名称	材質
本体	ポリアセタール
プランジャー	ポリアセタール

原理：プランジャーを押し込み、装着したカートリッジ内のペーストを押し出す。


【使用目的又は効果】

専用のカートリッジ内のペーストの押し出しに使用する。

【使用方法等】

- 1) カートリッジの着脱は、プランジャーを引いて、プランジャー先端が本体内に収まった状態で行います。
- 2) フジルーティング CD プランジャーへカートリッジを装着する際は、
 - ① フジルーティング CD プランジャー嵌合部の▲マークと、カートリッジの▲マークを合わせます。
 - ② ▲マーク同士を合わせた点を中心にして、回転させながら装着します。（最後まで回しきったことは、クリック感で確認できます。）カートリッジを外す場合は、この逆です。
- 3) カートリッジのキャップは、引き抜くように外します。この時、カートリッジの装着状態にズレのないことを確認します。
- 4) プランジャー後端の中心部を押し込んで、ペーストを練和紙に採取し、ペーストをすり切ります。

- オートクレープによる滅菌を行う場合は 115℃～118℃で 30 分、121℃～124℃で 15 分、126℃～132℃で 10 分のいずれかの条件で行います。

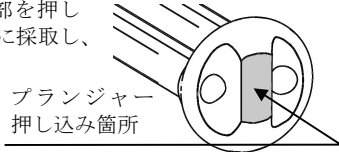

- 5) カートリッジの装着方向は、いつも同じ向きになるようにすること。（装着方向が変わると、左右のペーストの計量が適切にできないことがあります。フジルーティング CD プランジャー嵌合部の▲マークと、カートリッジの▲マークを合わせることで、方向を規定できます。）
- 6) 採取量が少ない場合、2つのペーストのバランスが安定しないことがあるので注意すること。
- 7) カートリッジが冷えている場合は、常温に戻してから使用すること。
- 8) 初めて、又はしばらく使用しなかったカートリッジの押し出し操作を行う場合、プランジャーの押し加減に注意すること。（プランジャーを強く押しすぎると、必要以上にペーストが押し出されてしまう場合があります。）

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 一部の薬液は、浸漬による洗浄・消毒で変色する恐れがありますが、使用上問題ありません。
 - ② 清掃液、消毒液、滅菌器については、各製造メーカーの指示に従い、正しく使用すること。
 - ③ オートクレープによる滅菌は、乾燥温度が 132℃を超える温度になる機種は使用できないので注意すること。
 - ④ オートクレープでの滅菌後は、本品が完全に冷えてから使用すること。
 - ⑤ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑥ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- 2) 直射日光を避けて保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 左右のペーストの計量が適切にできないことがあるため、カートリッジを確実に装着すること。
- 2) カートリッジを装着後、最初の1回目はペーストを押し出してすり切り、ペーストの左右の先端を合わせること。
- 3) ペーストのすり切りは、プランジャーを押したまま行うこと。（プランジャーから手を離してすり切ると、ペーストがカートリッジ内に吸い戻されるため、左右のペーストの計量が適切にできないことがあります。）
- 4) カートリッジを外す際は、プランジャーを完全に引き戻した後、カートリッジを装着時とは逆回転させて外すこと。