


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

ジーシー インプラント A a d v a 技工用器材

(SRラボスクリュー)

【形状・構造及び原理等】

本品は、補綴物のろう着時に、フレームワーク中のゴールドシリンダーをろう着用埋没材中のSRアバットメントアナログに締結したり、あるいは補綴物の研磨作業時にゴールドシリンダーをSRアバットメントポリッシングキャップに締結したりといった技工作業に用いるスクリューである。

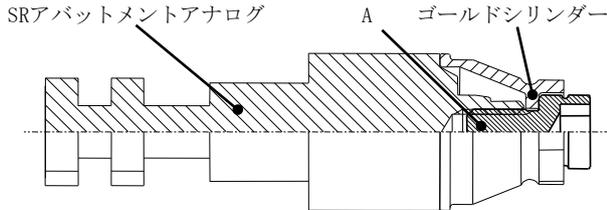

【材質】

部位	名称	原材料と金属材料
A	SRラボスクリュー	ステンレス鋼

【部品名】

SRラボスクリュー

【原理】

SRアバットメントアナログ、SRアバットメント ポリッシングキャップとのネジ嵌合部及びゴールドシリンダーとの嵌合部を併せ持ち、自身に付与されたネジによりこれらのコンポーネントを締結する。

【使用目的又は効果】

本品は、顎骨に直接埋入し咬合機能を回復させるインプラントシステムのうち、補綴物を作製するために用いる歯科技工用部品である。

【使用方法等】

ろう着

仮固定されたフレームワーク中にあるゴールドシリンダーを、本品を用いてSRアバットメントアナログに締結し、ろう着用埋没材で固定し通法に従ってろう着します。

研磨

ゴールドシリンダーを、本品を用いてSRアバットメント ポリッシングキャップで固定し通法に従って研磨作業を行います。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品を締結する際には、ゴールドシリンダーとSRアバットメントアナログ、あるいはSRアバットメント ポリッシングキャップとの間に付着物などの介在がなく、完全に適合していることを確認した上で締結すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

- ②本品の使用に際しては、使用前にジーシーインプラントセミナー等に参加し、必要な知識及び技術を確実に習得すること。また、必ずジーシー インプラント A a d v aマニュアルを参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。
- ③開封後の本品に、損傷などが無いことを確認してから使用すること。損傷などが認められた場合には、使用を中止すること。
- ④本品の締結には、専用のドライバーを使用すること。
- ⑤本品を補綴物の最終締結に使用しないこと。
- ⑥本品を再使用する際に損傷などが認められた場合には、廃棄して新しい製品を使用すること。
- ⑦本品は、専用のコンポーネントに対して使用すること。
- ⑧本品の形態変更、改造などをしないこと。
- ⑨本品は、【使用目的又は効果】及びジーシー インプラント A a d v aマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑩本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温・多湿・直射日光を避けて保管する。〔汚染及び錆を防ぐため〕
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い、正しく使用する。＊
洗浄剤は下記のものをお薦めします。
・防錆効果のある洗浄剤、酵素系洗浄剤（ジーシー ハイジーンウォッシュなど）
- 2) 洗浄を行った後には、錆、変色の発生を防止するため、直ちに水気を拭き取り保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480

20004413
310542AW

詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。