


機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具（38782000）

ジーシー カプセルアプライヤーⅣ

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼、ポリアセタール

形状：

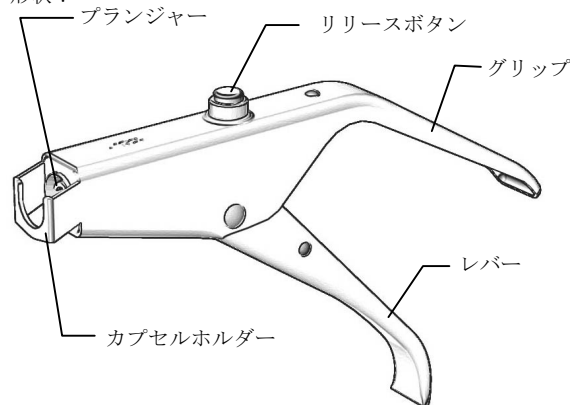

原理：レバーを握るとプランジャーが繰り出され、装着したカプセル内のペーストを押し出す。


【使用目的又は効果】

本品は、ジーシーの歯科用セメントカプセル（以下、カプセル）を装着し、カプセル内のペースト状の練和物を押し出し、歯牙窩洞又は修復部位等へ直接投与する専用押し出し器具である。

【使用方法等】

口腔内への直接充填に使用する場合は、オートクレーブ又は化学的滅菌・殺菌消毒剤による滅菌後、使用します。（オートクレーブの場合、115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分のいずれかの条件で行います。）

- 1) ジーシー カプセルミキサー CM-II などを用いて練和が完了したカプセルを、本品のカプセルホルダーに上から装着し、しっかり保持されるまで押し込みます。

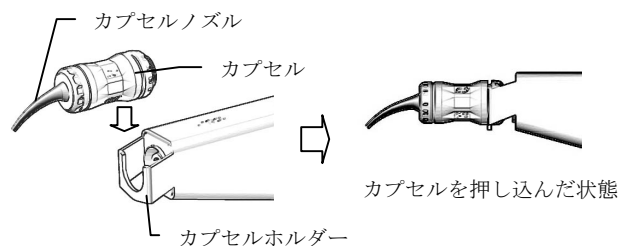

- 2) 本品のレバーを 2 回操作した後、3 回目以降のレバー操作はゆっくり行います。ペーストは、3 回目又は 4 回目のレバー操作中に、カプセルノズル内に押し出されてきます。
- 3) カプセルノズルを目的の位置にあて、4 回目のレバー操作を行い、ノズル先端からペーストを押し出します。
- 4) カプセルの取り外しは、リリースボタンを押し、プランジャーが完全に後退したことを確認した後、カプセルを上方に取り外します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) レバー操作時に、手指を挟まないように注意すること。
- 2) 本品のプランジャーが突き出た状態では、カプセルを装着できないので、リリースボタンを押し、プランジャーが戻っていることを確認した後、カプセルを装着すること。

- 3) カプセルが確実に装着されていることを確認してから、押し出し操作を行うこと。
- 4) レバーは、ラチェット音を確認するまで、しっかり握ること。
- 5) ペーストを押し出す際に、無理な力をかけないこと。押し出し感に異常が認められる場合は、使用を中止し、カプセルを外してから本品の動作確認を行うこと。本品に異常が認められる場合には使用しないこと。本品に異常が認められない場合には、カプセルに異常がある可能性が考えられることから、新しいカプセルに交換し使用すること。
- 6) カプセルを取り外す場合は、リリースボタンを押してプランジャーを完全に戻すこと。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①滅菌は、圧縮空気の吹き付け、洗浄液等による拭拭、超音波洗浄等により、付着物を除去した後に行うこと。
 - ②洗浄液・消毒剤・オートクレーブについては、各製造業者の指示に従い、正しく使用すること。
 - ③滅菌時及び乾燥時の温度が 132℃を超えるオートクレーブを、本品の滅菌に使用しないこと。（132℃以下でも、樹脂部が黄色く変色しますが、機能上問題ありません。）
 - ④本品は、ジーシー製品以外のカプセルには使用しないこと。
 - ⑤本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症を起こした術者は、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ⑥本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ⑦本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理する。
- 2) 錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しない。
- 3) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480