

歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 歯科用暫間被覆冠成形品（34976000）

ジーシー フラサコクラウン

【禁忌・禁止】

併用禁忌：相互作用の項参照。

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

- ・本品は、セルロースアセテートを成型加工した合成樹脂系暫間被覆歯（透明ストリップクラウン）である。
- ・形態別寸法を表 1 に示す。

【形態】 59 形態

中上右 0 1 1 0	中上右 1 1 1 1	中上右 2 1 1 2	中上右 3 1 1 3	中上右 4 1 1 4	中上右 5 1 1 5	中上右 6 1 1 6
中上左 0 2 1 0	中上左 1 2 1 1	中上左 2 2 1 2	中上左 3 2 1 3	中上左 4 2 1 4	中上左 5 2 1 5	中上左 6 2 1 6
側上右 0 1 2 0	側上右 1 1 2 1	側上右 2 1 2 2	側上右 3 1 2 3	側上右 4 1 2 4	側上右 5 1 2 5	-
側上左 0 2 2 0	側上左 1 2 2 1	側上左 2 2 2 2	側上左 3 2 2 3	側上左 4 2 2 4	側上左 5 2 2 5	-
犬上右 0 1 3 0	犬上右 1 1 3 1	犬上右 2 1 3 2	犬上右 3 1 3 3	犬上右 4 1 3 4	犬上右 5 1 3 5	犬上右 6 1 3 6
犬上左 0 2 3 0	犬上左 1 2 3 1	犬上左 2 2 3 2	犬上左 3 2 3 3	犬上左 4 2 3 4	犬上左 5 2 3 5	犬上左 6 2 3 6
-	中下右 1 4 1 1	中下右 2 4 1 2	中下右 3 4 1 3	-	-	-
-	中下左 1 3 1 1	中下左 2 3 1 2	中下左 3 3 1 3	-	-	-
側下 0* 320/420	側下 1* 321/421	側下 2* 322/422	-	-	-	-
犬下右 0 4 3 0	犬下右 1 4 3 1	犬下右 2 4 3 2	犬下右 3 4 3 3	犬下右 4 4 3 4	-	-
犬下左 0 3 3 0	犬下左 1 3 3 1	犬下左 2 3 3 2	犬下左 3 3 3 3	犬下左 4 3 3 4	-	-

※下顎側切歯（0、1、2）は左右共通です。

- ・形態名下段の 3 桁数字は、左から 2 桁が FDI 方式の歯式に基づく歯種を表し、最後の桁が大きさを表しています。大きさは 0 がもっとも大きく、数字が増えるにつれて小さくなっていきます。
- ・最右列は、174 歯セットに含まれない形態です。

表 1. 形態別寸法（単位は mm）

種類	形態番号	No. 0	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
中切歯上顎 (左右別あり)	長径	13.0	12.5	12.0	11.0	9.5	9.0	8.0
	横径	10.2	9.4	8.4	7.7	7.2	8.0	7.0
側切歯上顎 (左右別あり)	長径	11.0	10.0	9.0	7.5	8.0	7.0	-
	横径	7.8	6.8	6.6	6.3	5.8	5.5	-
犬歯上顎 (左右別あり)	長径	12.0	11.5	11.0	9.0	9.5	8.5	7.5
	横径	9.5	8.8	8.1	8.3	7.4	7.1	6.2
中切歯下顎 (左右別あり)	長径	-	10.5	9.5	8.5	-	-	-
	横径	-	5.9	5.4	4.8	-	-	-
側切歯下顎 (左右共通)	長径	13.0	12.1	11.7	-	-	-	-
	横径	6.8	6.5	6.4	-	-	-	-
犬歯下顎 (左右別あり)	長径	13.5	11.0	10.0	9.0	8.5	-	-
	横径	8.2	7.2	6.8	6.3	5.7	-	-

（数値は参考値）

材質

- ・セルロースアセテート

原理


- ・損傷歯又は支台形成歯を被覆することにより、暫間的な保護修復物として機能する。

【使用目的又は効果】

支台歯などに被覆する歯冠成形品で、暫間的に用いる。

【使用方法等】


- 1) 人工歯の選択と同様に、適当なモールドを選択します。

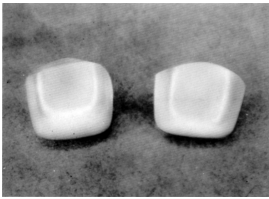


- 2) 欠損部に試適します。



- 3) あらかじめシェードを選択し、コンポジットレジンを填入圧接します。

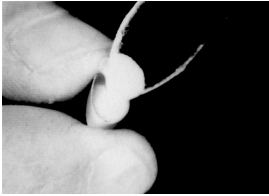

- 4) コンポジットレジンの余剰部分を、探針の先端などを用いて除去し、硬化させます。

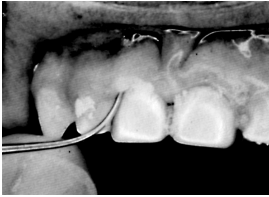

- 5) 硬化完了後、本品を撤去し、研磨修正を行います。



【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) コンポジットレジン填入時、気泡を埋入しないように注意すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

2) 重要な基本的注意

①本品に、歯冠用常温重合レジン又は歯冠用コンポジットレジンを用いる場合は、そのレジンの使用上の注意に従うこと。

②本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

④本品の使用により、発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

⑤患者への装着は、清浄な状態で行うこと。

3) 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

（1）[併用禁忌]（併用しないこと）

①本品に、歯冠用常温重合レジン又は歯冠用コンポジットレジンを用いる場合、メタクリレート系モノマー又はポリマーに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

主な設計元：フラサコ社（ドイツ連邦共和国）
frasaco GmbH

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480