


機械器具 6 5 歯科用充填器
管理医療機器 電動式歯科用歯内ペーストキャリア (41539000)
ジーシー タックエンド コンデンサー

【形状・構造及び原理等】

形状：

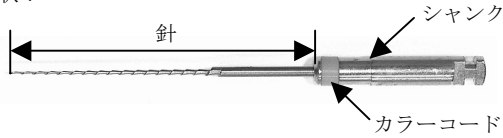

種類：

	#20	#25	#30	#35	#40
テーパー 2 %	25	25	25	25	25
カラーコード	黄	赤	青	緑	黒

※数字は針の長さ（単位 mm）を示す

材質：

- ・シャンク : 銅合金（ニッケルめっき）
- ・カラーコード : シリコン樹脂
- ・針 : ニッケルチタン合金

原理：

針部の螺旋によりペーストを移送する。

【使用目的又は効果】

主としてガターパーチャポイント等を充填するために使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用前に必ず滅菌を行います。滅菌はオートクレーブ、ケミクレーブにて行います。オートクレーブは 115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分のいずれかの条件で行います。ケミクレーブは製造業者の指示に従って使用します。
- 2) 根管拡大・形成後、根管内にガターパーチャポイントを挿入し、タックエンドスプレーダーを用いてプレスし、タックエンドガターを注入するスペースを作ります。
- 3) ハンドピースのコントラに本品を装着後、タックエンドヒーターで加熱したタックエンドガターを本品に塗布します。塗布する際は、本品を回転させずにタックエンドガターに挿入し、ピストンを押しながらノズル口径と同径となるように引き出します。タックエンドガターは、少し多めに思える分量を本品に塗布します。特に塗布したガターの先端形状は、根管に挿入し易いように細くします。
- 4) タックエンドガターを塗布した本品を、直ぐに充填する根管に抵抗を感じるまで挿入します。その後、1 mm 本品を引き上げて 5000 回転数/分未満で回転させて引き抜きながら根管充填を行います。なお、充填に際しては、タックエンドガターを本品に塗布後、約 15～30 秒の間に根管内に挿入し、タックエンドガターの充填を終了するようにします。
- 5) 充填後、余剰のガターパーチャポイント上部を切断し、充填したタックエンドガターと共にプラグガーでプレスし、冷却硬化させて根管充填作業を終了します。
- 6) 術後、本品を十分に洗浄し、収納ボックスに入れ、オートクレーブ滅菌します。
(滅菌条件と滅菌方法は、術前と同様です。)

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 術後、洗浄剤・消毒剤などを用いて付着物を除去した後、滅菌（滅菌条件は術前と同様）を行うこと。
- 2) 本品使用時は、予め患者の口腔外で回転させ、針部に振れ、曲がりなどの異常が無いことを確認すること。
- 3) 本品は、5000 回転数/分以上の回転速度で使用しないこと。
- 4) 破折の原因になるので、無理な角度や力で操作しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - ① 薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① ニッケル及び本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 管内での破折を防ぐため、使用前には必ず針の点検を行い、異常のないものを使用すること。また、術中に針の劣化などが見られた場合、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
 - ③ 本品のハンドピースへの装着はメーカーの指示に従い、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。その際は、手指に刺さらないように注意すること。
 - ④ 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
 - ⑤ 洗浄剤及び消毒剤使用時の濃度、浸漬時間、温度などについては、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。
 - ⑥ 塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消毒は行わないこと。また、その他の消毒剤で長時間浸漬する場合は錆びる恐れがあるので、防錆剤を添加すること。（洗浄剤、消毒剤の使用によりシャンク部の色が多少変わることがありますが、機能上問題ありません。）
 - ⑦ 使用中はしっかり保持させ、患者の口腔内に落下させないこと。
 - ⑧ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑨ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ⑩ 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しない。
- ・本品は、湿度の高い場所に長時間保管すると錆びる恐れがあるので、乾燥した場所に保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

使用後、洗剤を用いて洗浄し、使用前と同条件で滅菌する。

〔使用者による保守点検事項〕

- 1) 再使用する際には、使用後できるだけ早く、清掃液を用いて付着物を除去し、滅菌を行う。
- 2) 乾熱滅菌、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤は使用しない。
- 3) 清掃液・滅菌器については、各製造業者の指示に従い、正しく使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー
主たる設計元 : マイクロメガ社（フランス）
MICRO-MEGA SA

発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480