

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用多目的ガラスポリアルケノエートセメント（70878000）
（歯科用充填・修復材補助器具（38782000））**

ジーシー フジTEMP

【禁忌・禁止】

グラスアイオノマーセメント及び本材に使用している成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状・構造**

構成品	主成分
Aペースト	フルオロアルミノシリケートガラス、精製水、グリセリン、パラベン
Bペースト	ポリアクリル酸、精製水、グリセリン、二酸化ケイ素、硫酸バリウム、パラベン

原理

AペーストとBペーストの混合により、フルオロアルミノシリケートガラスとポリアクリル酸が反応して硬化する。

特性

項目	規格	参考値
硬化時間	4～10 分	4 分 30 秒

(JIS T 6610 による)

【使用目的又は効果】

金属冠、レジン冠、ブリッジなどの歯科用補綴物の仮着に使用する。

【使用目的又は効果に関連する使用上の注意】

- 1) サハライドや知覚過敏抑制材を塗布した歯面への使用では、歯質と十分な接着力が得られない場合があるので、留意して使用すること。


【使用方法等】

- 1) 通法に従い支台歯を清掃し、乾燥します。
- 2) ジーシー CDディスペンサーⅢにカートリッジを装着します。キャップを外し、レバーを押して必要な量のペーストを付属の練和紙に押し出した後、ジーシー CDディスペンサーⅢを立てるようにしてペーストをすり切ります。**
- 3) 採取したペーストを、プラスチックヘラを用いて、練和紙を広く使い、円を描くように少し強めの力で 10 秒間、しっかり練り込みます。
- 4) 補綴物の被着面に練和されたセメントを塗布し、仮着します。
- 5) 操作時間は、練和開始より約 2 分です。余剰セメントは、口腔内で 1 分程度経過して半硬化の状態で除去します。
- 6) 余剰セメント除去後の口腔内保持時間は約 3 分です。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 支台歯への仮着力を抑制する場合は、必要に応じて被着面にワセリン等の分離材を塗布すること。特に適合性の良い補綴物（最終補綴物、インプラント上部構造体、プロビジョナル等）を仮着する場合は、維持力が大きくなることが懸念されるため留意すること。
- 2) 支台歯を乾燥させすぎると、補綴物脱着後に支台歯表面を清掃しにくくなるので注意すること。
- 3) 本材は、常温（15～25℃）での使用を基本とすること。室温が高くなると操作時間は短く、また室温が低いと長くなるので注意すること。[本材の硬化反応は温度の影響を受けるため]
- 4) 覆髄を必要とする場合は、水酸化カルシウム系の覆髄材などで歯髄保護を行うこと。
- 5) エアーシリンジ等を使用して支台歯の乾燥を行う場合には、事前にオイルミスト等接着阻害物質が噴射されていないことを確認してから使用すること。[接着阻害物質により接着力が低下するため]

- 6) カートリッジをジーシー CDディスペンサーⅢに装着し、リリースレバーの付け根部分を止まるまで押し込む際、ペーストがノズルから出る場合があるので、キャップは外さずに行うこと。**
- 7) 適切な比率でペーストを採取するために、カートリッジは確実にジーシー CDディスペンサーⅢに装着すること。またカートリッジは、最後まで回しきつたことを確認すること。**

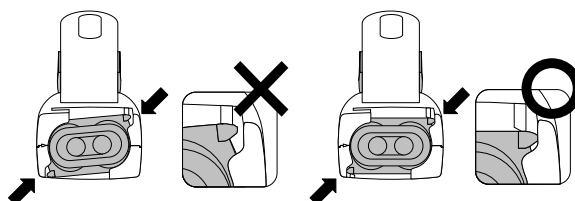

- 8) 初めて、あるいは期間をおいて使用するカートリッジは、ノズル先端に空気が内在する場合があるので、最初の 1 回目の押し出しで左右のペーストの先端を合わせること。
- 9) ペースト採取時、すり切る前にジーシー CDディスペンサーⅢのレバーを戻してしまうと、押し出されたペーストがカートリッジ内部に引き戻されてしまうので、レバーを押したままの状態ですり切ること。**
- 10) カートリッジの着脱は、プッシュボールが完全にジーシー CDディスペンサーⅢ内部に戻っていることを確かめてから行うこと。**

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - ① 薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ② 本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ③ 本材の未硬化物は、直接素手で触れないこと。未硬化物に触れる場合は、接触による過敏症を防ぐためにプラスチック手袋、ゴム手袋等を着用すること。
 - ④ 本材が、口腔粘膜、皮膚などに付着しないよう充分注意すること。ラバーダムを使用するなど、口腔粘膜・口唇への接触を防止すること（ラバーダムなどで口腔粘膜・口唇への接触が防止できない部分については、ココアバターなどを塗布することをお勧めします）。口腔粘膜に付着した場合にはすぐに綿球で拭き取り、操作終了後に十分に水洗すること。また皮膚に付着した場合には、すぐに流水で洗浄すること。万一目に入った時は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ⑤ 他の製品と混用しないこと。[本材の特性が得られないため]
 - ⑥ 正しい計量のために、カートリッジのノズルにペーストが付着した場合は、ガーゼなどで拭き取ること。
 - ⑦ カートリッジは、使用后すぐに確実にキャップをすること。[正しく計量できなくなるため]
 - ⑧ セメントが衣類に付着すると除去が困難なことから、エプロンなどを使用して付着を防止すること。
 - ⑨ 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと

- ⑩本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑪本材については、試験による MR 安全性評価を実施していない。
(自己認証による)*

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・直射日光、高温多湿を避け、室温に保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

[有効期限]

本材は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※(例 EXP. 2028-02 は
使用期限2028年 2月 を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー

主たる設計元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480