

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ポイント (34791000)

ジーシー ガターパーチャポイント アクセサリー


【禁忌・禁止】

本品及び本品配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

形状

大、中

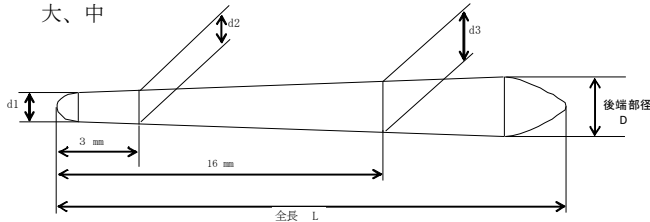

小

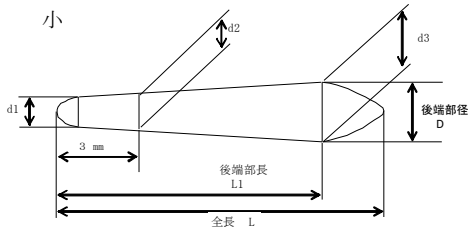

※小については d3=後端部径 D

種類(サイズの呼称)		先端径 d1 (mm)	3 mm 径 d2 (mm)	16 mm 径 d3 (mm) (小: d3=D)	全長 L (mm)
標準型	大 (02834)	0.28±0.05	0.38±0.05	0.82±0.05	22.5±0.5
	中 (02836)	0.28±0.05	0.39±0.05	0.86±0.05	18.5±0.5
	小 (02348)	0.23±0.05	0.37±0.05	0.76±0.05	12.5±0.5 L1=11.1±0.5
太型	大 (03545)	0.35±0.05	0.49±0.05	1.07±0.05	22.5±0.5
	中 (03049)	0.30±0.05	0.45±0.05	1.08±0.05	18.5±0.5
	小 (02673)	0.26±0.05	0.48±0.05	1.02±0.05	12.5±0.5 L1=10.4±0.5
細型	大 (02524)	0.25±0.05	0.32±0.05	0.63±0.05	22.5±0.5
	中 (02130)	0.21±0.05	0.30±0.05	0.69±0.05	18.5±0.5
	小 (02135)	0.21±0.05	0.32±0.05	0.61±0.05	12.5±0.5 L1=11.3±0.5
特 (01824)		0.18±0.05	0.25±0.05	0.56±0.05	25.5±0.5

・ JIS T 6515 に適合するテーパー状の根管充填ポイントであり、アクセサリとして用いる。

【単品】

1 函=150 本 (各形態：大、中、小、太大、太中、太小、細大、細中、細小、特)

【組合せ】

1 函=混 (標準型 3 種類 (大・中・小) 各 50 本入)
太混 (太型 3 種類 (大・中・小) 各 50 本入)
細混 (細型 3 種類 (大・中・小) 各 50 本入)

主成分

・ 酸化亜鉛、ガターパーチャ (1, 4-エトランスポリイソプレン)

原理

・ 酸化亜鉛、1, 4-エトランスポリイソプレンを主成分とする根管充填ポイントであり、(アクセサリ) ポイントとして用いる。

【使用目的又は効果】

酸化亜鉛、1, 4-エトランスポリイソプレンを主成分とした歯の根管充填に用いる (アクセサリ) ポイントである。

【使用方法等】

- 1) 充分かつ適切に拡大・形成され、かつ消毒された根管内に消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム水溶液等の薬液で消毒したガターパーチャポイント (メインポイント) を挿入します。*
- 2) メインポイントと根管壁の間に、ブラガー、スプレーダー等のインストルメントを用いて消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム水溶液等の薬液で消毒した本品 (アクセサリポイント) を加圧充填し、空隙を緊密に封鎖します。*
- 3) 根管口で、余剰なガターパーチャポイントをヒートカッター等を用いて除去します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム水溶液等の薬液で消毒してから使用すること。消毒方法の詳細は、使用する薬液の取扱説明書を参照すること。[感染症を引き起こす可能性がある]*
- 2) 本品は、オートクレーブまたは乾熱による滅菌を避けること。[劣化または変形してしまう可能性がある]

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ③ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑤ 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。(自己認証による)**

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 直射日光を避け、室温で保管する。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【有効期限】

本品は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※ (例 EXP. 2027-02 は
使用期限 2027 年 2 月 を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：(お客様窓口) 0120-416480