


歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 歯科用暫間被覆冠成形品 (34976000)

ジーシー クラウン S


【禁忌・禁止】

併用禁忌：相互作用の項参照

【形状・構造及び原理等】

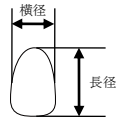

中切歯、側切歯、犬歯の形状

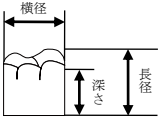

小臼歯の形状

【寸法】

種類	形態番号	Na									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中切歯上顎 (左右の別あり)	長径	10.0	10.5	11.5	12.0	13.0	13.5	14.0			
	横径	7.2	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0			
側切歯上顎 (左右の別あり)	長径	8.7	9.2	10.0	10.5	11.5	12.5	13.0			
	横径	5.7	5.9	6.3	7.0	7.5	8.0	8.3			
中・側切歯下顎 (左右共通)	長径	7.3	7.6	8.1	8.3	8.9	9.5	9.9	10.3	11.4	12.3
	横径	4.3	4.6	4.7	4.9	5.1	5.5	5.9	6.2	6.5	6.7
犬歯上顎 (左右の別あり)	長径	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	11.7	12.3			
	横径	7.2	7.4	7.6	7.7	8.0	8.4	8.9			
犬歯下顎 (左右の別あり)	長径	8.2	9.2	10.0	11.0	12.8					
	横径	4.9	5.4	5.8	6.7	7.6					
小臼歯 (上、下顎左右共通)	長径	7.5	7.6	7.8	8.3	9.3	10.1	10.7	11.1		
	横径	5.9	6.0	6.2	6.5	6.8	7.2	7.6	8.2		
	深さ	6.0	6.1	6.4	6.8	7.5	7.8	8.2	9.0		

各形態単一包装（6 歯入）
前歯用全形態 342 歯セット（57 形態各 6 歯入）

主成分：ポリメタクリル酸メチル

原理

内面が凹部の前歯形状又は臼歯形状を成し、内面の凹部に常温重合レジン配置することで、損傷歯又は支台形成歯を被覆する暫間的な保護修復物を製作する。

【使用目的又は効果】

本品は、内面が凹部の前歯形状又は臼歯形状を成し、内面の凹部に常温重合レジン配置することで、損傷歯又は支台形成歯に被覆し、歯科治療中の暫間レジン冠として使用する。

【使用方法等】

- 1) 適当な種類、形態を選択し、常温重合レジンの餅状物を填入、患歯に圧接し硬化させる。
- 2) 硬化後修正して、仮着用セメントで合着する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品を通法に従い、歯冠用常温重合レジンを用いて使用する場合は、その歯冠用常温重合レジンの使用上の注意に従うこと。
- 2) 削合及び研磨は通法により行うが、研磨箇所温度が上昇しないように注意すること。
- 3) 形態修正を行った場合には、その部分を十分に研磨すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ② 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、すぐに使用を中止し医師の診断を受けること。
 - ③ 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ④ 本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネなどを使用すること。
 - ⑤ 他の製品と混用しないこと。
 - ⑥ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑦ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ⑧ 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）**

2) 相互作用

(1) [併用禁忌]

- ① 本品を通法に従い歯冠用常温重合レジンを用いて使用する場合、メタクリレート系モノマー又はポリマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。[過敏症を誘発する可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480