


歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 アクリル系レジン歯 (70807000)

ジーシー リブデントFB-20プラスチック100

【形状・構造及び原理等】

本品は咬頭傾斜が約 20° のレジン臼歯であり、形状を以下に示す。

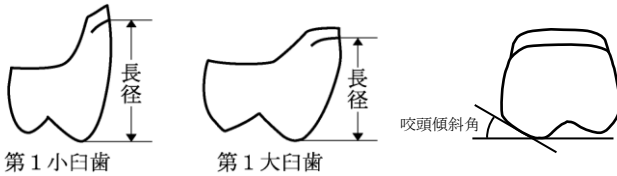

(形態及び寸法表)

形態 番号	片側全横径(mm)	第1小臼歯長径(mm) (カラー部を除く)	第1大臼歯長径(mm) (カラー部を除く)
28M/ 30	上顎	28.0	8.0
	下顎	30.0	8.0
30M/ 32	上顎	30.0	8.7
	下顎	32.0	8.5
32M/ 34	上顎	32.0	9.5
	下顎	34.0	9.0

色調(4色)：104、108、112、114

形態(3種)：28M/30、30M/32、32M/34

臼歯8揃＝1個

主成分：ポリメタクリル酸メチル

原理

- ・アクリル系レジン製の既製人工歯であり、義歯に植立して義歯床を製作し使用する。

【使用目的又は効果】

本品は、義歯に植立するアクリル系レジン製の臼歯である。

[使用目的又は効果に関連する使用上の注意]

- 1) アクリリック樹脂以外の床用樹脂を用いて義歯を作製する場合は、本品に接着しないので、床用樹脂メーカーの指定の方法に従って前処理をすること。また、120℃以上の環境に長時間置くと、変形する恐れがあるので注意すること。さらに、成形方法(例えば、200℃で20分係留など)によって強度が低下し、破折することもあるので注意すること。

【使用方法等】

- 1) 通常の義歯排列法により排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 形態修正を行った場合は、その部分を十分に研磨すること。
- 2) 口腔内において色素沈着(煙草のヤニなど)により着色した場合は、みがき砂をつけ硬毛ブラシを用いて研磨して除去し、亜鉛華(酸化亜鉛)をつけ、軟毛ブラシを用いて艶出し研磨すること。
- 3) 本品の表面には凸凹が付与されているため、プラークや煙草のヤニが付着することがあるので、義歯用ブラシなどを用いてよく清掃するように、患者に指導すること。
- 4) シアノアクリレート系の瞬間接着材を用いて本品を仮固定すると、重合後開リン時に本品が割れる事があるので、シアノアクリレート系の瞬間接着材は用いないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくとも問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
①メタクリレート系モノマー又はポリマーに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
④本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
⑤本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネなどを使用すること。
⑥他の製品と混用しないこと。
⑦本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑨本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。(自己認証による)**

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：(お客様窓口) 0120-416480