


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科用フラスコ (42343000)

ジーシー デュープフラスコ

【形状・構造及び原理等】

〔外観〕

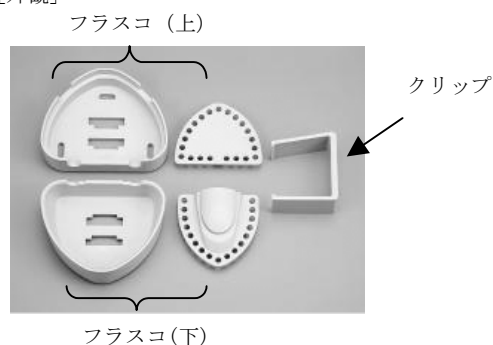

〔形状〕

フラスコ (上) ; 幅 83×奥行 103 (mm)
フラスコ (下) ; 幅 79×奥行 99 (mm)
フラスコ (上) (下)、クリップ 1 組

〔原理〕

暫間義歯床用レジンの重合を行う際に用いる専用フラスコとして使用し、レジンの重合時の成型する型の保持を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、ジーシー デュープレジン重合時に、成型する型の保持を行う容器として使用する。

【使用方法等】

- 1) デュープフラスコに義歯を試適します。フラスコの上下が確実に嵌合すること、及び義歯とフラスコの内壁面が接触しないことを確認します。
- 2) デュープフラスコにアルジネート印象材を盛り、複製の基となる義歯の印象を採得します。フラスコを組み合わせ、加圧する際は手指でゆっくり加圧を行い、フラスコ上面の排出口及び嵌合部の隙間から印象材を確実に排出させます。
- 3) ジーシー デュープレジンを添付文書に従って混和し、レジンをフラスコに流し込みます。詳しい使用法は、添付文書を参照してください。
- 4) レジン流し込み後は、時間が経過するとレジンモノマーが揮発し、気泡の混入や義歯の厚みを狂わせる原因になるので、すぐにフラスコを組み合わせます。フラスコを手指でゆっくり加圧し、フラスコ嵌合部の隙間から余分なレジンを確実に排出させます。排出されたレジン、硬化後に取り除きます。付属のストッパーをフラスコに対して横方向からはめ込み、フラスコを固定して硬化を待ちます。硬化後、デュープフラスコから複製義歯を取り出し、バリなどをバーなどで削り、研磨・調整します。
- 5) 必要であれば、リベース材などで粘膜の調整を行い、暫間的複製義歯を作製します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) フラスコを組み合わせ、加圧する際は、必ず手指で行い、プレス器は使用しないこと。
- 2) 混和完了後すぐに（流動性がある状態）流し込むこと。
- 3) レジン流し込み後は、すぐにフラスコを組み合わせること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 本品は、室温にて保管する。
- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480