



INS-B506A-C

**2017 年 8 月改訂（第 3 版（新記載要領に基づく改訂））

医療機器届出番号：13B1X00204D00041

*2007 年 10 月改訂（第 2 版）

医療用品 4. 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ（JMDN コード：13695000）

フェモラルスポンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

**

(1) 再使用禁止

*

(2) 再滅菌禁止


(3) 本品を体内に埋植したまま閉創しないこと。[インプラントとして機能しないため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、整形外科手術の際、大腿骨髄腔内の生食水や体液等を除去するために用いるスポンジである。

原材料：ポリビニルアセタール

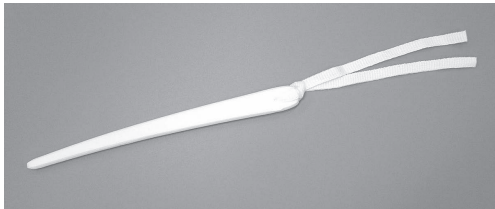

2. 原理

本品の吸水性により、大腿骨髄腔内の生食水や体液等を除去する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、整形外科手術の際、大腿骨髄腔内の生食水や体液等を除去するために用いるスポンジである。

2. 適応症例

骨セメントを使用する関節手術等を必要とする症例

** 【使用方法等】

本品は、滅菌済みであるのでそのまま使用できる。

髄腔内を洗浄後、フェモラルスポンジを大腿骨髄腔内に挿入し、残留している生食水や血液をスポンジに含ませて髄腔内を乾燥させる。

【保管方法及び有効期間等】

** 1. 保管方法

室温保存

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

** 2. 有効期間

使用期限は外箱に表示[自己認証（自社データ）による]

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

URL: depuysynthes.jp

製造業者：

・デピュー・インターナショナル社

(DePuy International Ltd) 英国