



DSS-K-258-02

2016年7月改訂(第2版(新記載要領に基づく改訂))  
2013年9月27日作成(第1版)

医療機器届出番号 13B1X00204SS0003

機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 脊椎手術用器械 JMDNコード 70963001

### USS手術器械セット

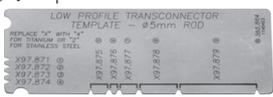
#### 【形状・構造及び原理等】

- ・本品は、脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手動式の手術器械である。
- ・本品は、再使用可能である。
- ・本添付文書に該当する製品(販売名)については包装表示ラベル又は本体に記載されているので確認すること。

デブスゲージ	
ドリルスリーブハンドル	
USS ホールディングスリーブ	
ホールディングスリーブ	
USS ドリルガイド	
USS SS ハンドル	
USS ハンドル	
USS プッシャー	
USS ソケットレンチ	
USS SS ソケットレンチ	
ソケットレンチ 11mm	
ソケットレンチ	

トルクハンドル	
USS スクリュードライバー	
T型スクリュードライバー	
USS スプレッター	
USS SS スプレッター	
コンプレッサー	
USS SS 圧迫用フォーセプス	
USS SS ロッドホルダー	
USS ロッドホルダー	
USS ロッドプライヤー	
USS 挿入用プライヤー	

USS SS 挿入用プライヤー	
USS 挿入用プライヤーサポート	
USS SS 挿入用プライヤーサポート	
USS スリーブブッシャー	
USS SS スリーブブッシャー	
USS SS スリーブポジショナー	
スリーブポジショナー	
USS ペディクルロケータ	
USS ラミナロケータ	
USS SS ラミナロケータ	
USS SS フックホールディングフォースeps	
USS フック・スクリューホルダー	
USS SS フック・スクリューホルダー	
USS SS フックポジショナー	
フックポジショナー	
USS チゼル	
USS ペディクルプローブ	
ペディクルサウンダー	

USS ペディクルオウル	
ペディクルフィーラー	
USS ロッドカッター	
USS チューブ型ロッドバンダー	
USS ロッドブッシャー	
USS SS ロッドブッシャー	
USS SS 計測テンプレート	
テンプレート A	
USS ベンディングテンプレート	
USS ベンダー	
USS SS ベンダー	
USS SS ベンディングプライヤー	
USS リダクションスリーブ	
USS リダクションナット	
ボーンインパクト	
スクリュードライバースhaft	
パースエーダー	

**【使用目的又は効果】**

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる。

**【使用方法等】**

## 1. 使用前

- (1) 各製品が正常に動作することを確認すること。
- (2) 滅菌後は無菌的に操作すること。
- (3) 本品は未滅菌品であるので、使用に先立ち次の条件で高圧蒸気滅菌してから使用すること。

<推奨する滅菌条件>

高圧蒸気滅菌(プレバキューム型)

温度	時間
132℃	4 分間
134℃	3 分間

温度が 138℃を超えないようにすること。

## 2. 使用時

一般的な使用方法

- ・本品の使用方法は、脊椎手術用器械の一般的な使用手順による。

## 3. 使用後

- (1) 手術用器械は付着した血液等を除去するため、使用後速やかに洗浄すること。付着した血液等を乾燥させてしまうことにより、通常の洗浄過程で除去することが困難となる場合がある。血液や組織片等が十分除去されていない状態での滅菌操作や温水での洗浄操作により、タンパク等が変性し、通常の洗浄過程での除去が困難となる場合がある。
- (2) 手術終了後は、各製品を清潔な状態になるまで洗浄・滅菌を行い、収納ケースへ戻すこと。

## 4. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 使用するには弊社推奨のインプラント手術器具を使用すること。また、傷をつけないこと。

**【使用上の注意】**

## 1. 不具合・有害事象

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象は以下の通りである。また、以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行なうこと。

- (1) 重大な不具合
  - 1) 器具もしくは器械の変形及び折損
- (2) 重大な有害事象
  - 1) 血管損傷等
  - 2) 一過性又は永続性の神経損傷等
  - 3) 筋肉と線維組織の弛緩等
  - 4) 骨折及びインプラントの緩み: 高齢者の場合、骨粗鬆症化により術中の過度の力によりこれらの有害事象が生じうる可能性が高いので慎重に使用すること。
  - 5) 破損片等の体内遺残
  - 6) 骨壊死
  - 7) 感染

**【保管方法及び有効期間等】**

## 1. 保管方法

- (1) 乾燥した清潔な場所で室温で保管すること。
- (2) 保管中は器械が損傷しないように十分注意すること。

**【保守・点検に係る事項】**

1. 本品使用後は、洗浄、濯ぎ等の汚染除去を行なった後、【使用方法等】に示す滅菌方法及び滅菌条件にて滅菌を行ない保管すること。
2. ジョイント部を持つ器械やドリルスリーブ等の中空構造を持つ器械については、隙間部に血塊等が残存しないよう、術中の使用毎に濯ぎを行い、術後速やかに入念な洗浄を実施すること。必要に応じて、手洗いや、超音波洗浄器を含めた各種洗浄器の使用、各種洗剤の併用すること。
3. 本品使用前に【使用方法等】に示す滅菌方法及び滅菌条件で滅菌

を行なうこと。

4. 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
5. 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用する時には、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意をすること。
6. 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物等がないことが確認できるまで洗浄すること。
7. 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。
8. 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー(磨き粉)は器具の表面が損傷するので汚染除去および洗浄時の使用はしないこと。
9. 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病等の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合は、弊社にご連絡ください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者の名称: ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

電話番号: 03-4411-6133

外国製造業者の名称: シンセスユーエスエープロダクツ社(SYNTHES USA PRODUCTS, LLC)

外国製造所の国名: アメリカ合衆国