

特定保守管理医療機器

メディツTST33

(販売名)

警告

本装置の、設置に関しては注意を要する為専門の技術を持った者が行うこと。
装置内部には、電子機器や高電圧になる部品もありますので、分解はしないでください。
機器の修理・設置は専門の技術を持った者が行うようにしてください。

禁忌・禁止

分解・改造を行わないでください。
危険ですので、動作中に保護カバーを開け装置内に手を入れないでください。
感電の恐れがありますので、濡れた状態での電気関連部分への接触は避けてください。
故障の原因になりますので、本体を濡らさないようにしてください。

重要な基本的注意

機器本体の異常を感じたときは、速やかに電源をお切りください。


併用禁忌・禁止

当該医療機器に関しての報告はありません。

不具合・有害事象

検査に支障をきたす場合がありますので、染色層内の汚染には十分注意してください。

形状

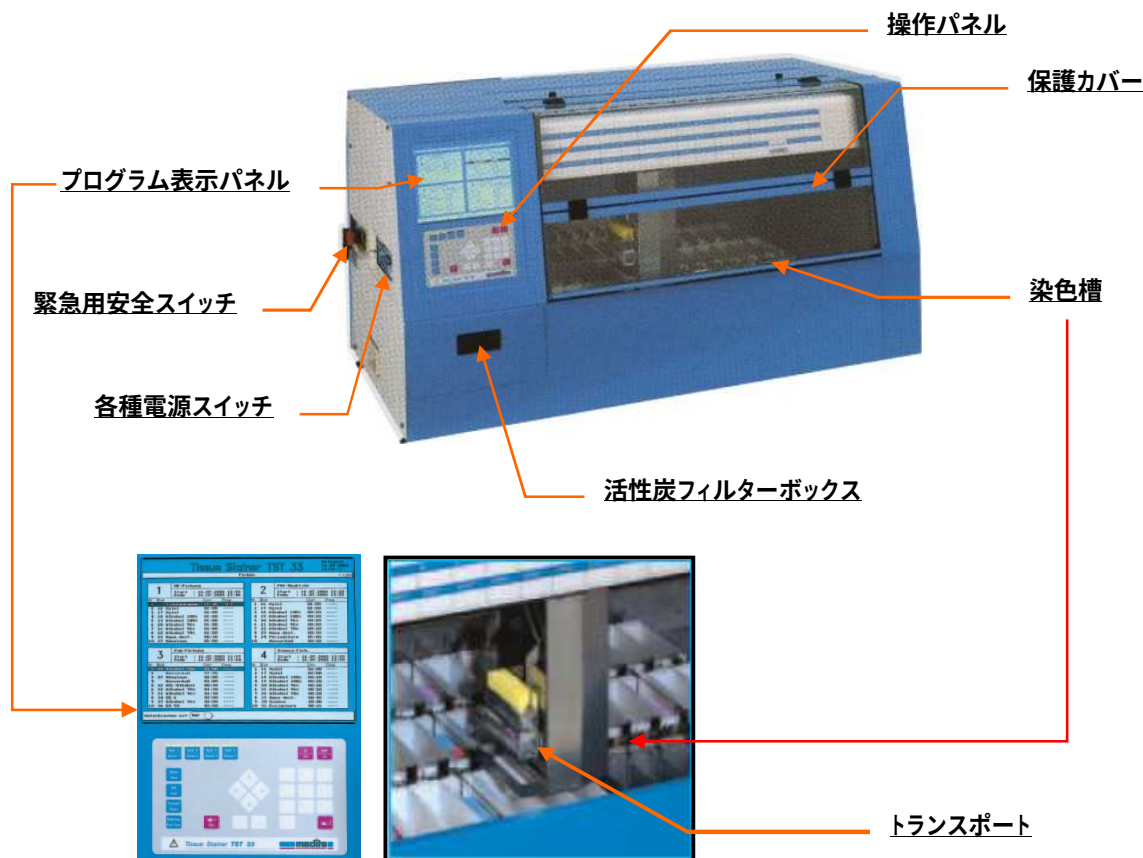

外形寸法・重量

W1210×D620×H640 / 75kg

消費電力

100～115V 50/60Hz 100VA

原理

自動染色装置である本機器は、本体に内蔵されているICプログラムシステムにより制御されてプログラム設定を行うことで、自動的にトランスポートが染色検体を移動し任意の染色槽へ運び染色検体を自動的に染色する装置です。
このプログラム制御と、各種染色槽・トランスポートシステムの組み合わせにより様々な自動染色処理が可能な装置です。

メディツTST33

白井松器械株式会社

使用目的	病理包埋により固定した組織切片を、自動染色する装置で装置バケット毎に反応時間や染色液を、個別にプログラム設定できるように設計された装置です。
品目仕様	バケット数：12個（1バスケット：スライド30枚収納） 総液槽数：44個 スタート槽4 乾燥槽2(40℃～90℃まで設定可能) 回収層4 流水槽6 染色槽30 試薬槽容量：360ml メモリー：染色プロトコール 20種 試薬記録 85種 通常処理能力：60枚/hr 臭気除去機能：活性炭フィルター除去機構搭載
操作方法・使用方法	基本操作及び使用方法・プログラム操作については、本機に付属されている「取扱い説明書」を必ず参照・熟読してから、使用してください。
使用上の注意	装置動作中は、必ず本機のカバーを閉めて使用してください。 装置動作中に、機器内部に手などを入れないでください。 装置を動作する前に、必ず装置の外観の異常などが無いか確認してください。 装置の性質上電気を使用しますので、感電・ショートなどに十分注意してください。 装置に異常を感じた場合は、速やかに電源を抜いて専門修理業者にご連絡ください。
保管・耐用年数	適正使用温度(保管温度)：10℃～40℃ 適正使用湿度(保管湿度)：10%～75% 標準耐用年数：約5年(当社推奨 適正使用・保守メンテナンス等維持実行時)
保守・点検など	日常点検と弊社が行う定期点検とあります。 日常点検は、お客様が取扱説明書の記載にある点検事項に基づいて行う点検です。 必ず、点検・保守事項を良くお読みになって実行してください。 日常点検において、異常などに気づいた場合は必ず弊社サービス等にご連絡ください。 点検・保守において必要とされる修理などは実施してください。 保守部品などは定期的な交換をお勧めいたします。 当該装置は、特定保守管理医療機器に該当しますので修理などは修理業許可を取得している専門業者のみが行うことができます、詳しくは弊社担当者までご連絡ください。
包装	一台単位構成で包装されています。

製造元	Medite GmbH Wpffenweberstrabe12D-31303 Burgdorf/Germany Tel 49-0-5136-8884
製造販売元	白井松器械株式会社 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-19-16 TEL 06-6942-4522