

機械器具27 一般医療機器 クリオスタット・マイクローム

ブライト クリニカット

(販売名)


警告

本機を分解・解体しないでください。

禁忌・禁止

- 使用時以外は専用のケースで保管するかナイフガードをしてください。
- 付属品のクライオMベッド、マイクロームオイルを取扱う時は目や口に入らないよう注意してください。
- 本機の設置には様々な要件を満たす必要がある為、専門知識のある人以外設置しないようにしてください。
- 迅速凍結台を使用する場合は、充分に手指を保護してください。
- 試料の脱着時はハンドルを固定し行ってください。
- マイクローム刀の取り扱いには充分注意してください。

形状

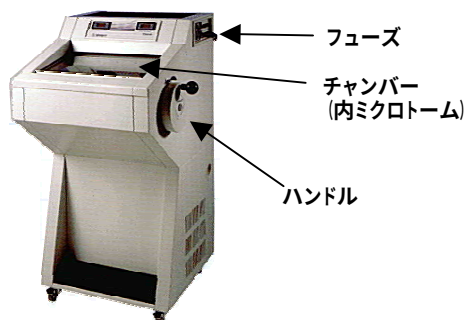

使用目的・適応

- 病理組織診断

品目仕様

- クリニカット (本体)
 - 内臓マイクローム・・・3020型ロータリー
 - 温度範囲・・・20℃～35℃
 - 超迅速凍結台・・・凍結プレート取り付け式／温度絶縁体
 - 凍結プレート・・・脱着式20℃の場合-45℃～-53℃
 - フラット面と3種類のブロック型穴
 - 熱吸収重りアセンブリー・銅製、スプリング調節、移動可
 - ハンドル・・・ボールクリップ付き
 - 窓の曇り止め・・・小型送風ファン (26W)
 - 照明・・・8w×300mm蛍光灯
 - チャンバー・・・寸法410×370×450
 - 内/外装ステンレス/ポリマーコーティング
 - チャンバー外操作の有無・・・
 - 切截ハンドル／外　　ミクロン設定つまみ／内

カール防止板の操作つまみ／内
冷凍機・・・密閉型100～115V 50/60Hz 645W
必要電源・・・100V 15A以上
外形寸法・・・605×580×1130(mm)
窓開口部寸法・・・280×445(mm)
付属装備品:試料台 (取り付けホルダー) 切屑トレー
迅速凍結台プレート、低温グリス、刀
カール防止板、包埋剤クライオMベッド
ブラシ、ヒューズセット、L型レンチ (4種)

操作方法・使用方法

本機の操作、使用方法は取扱説明書を参照して使用してください。

使用上の注意

- 内部装置に触れると感電の恐れがありますので注意してください。
- 消毒方法には十分注意して行ってください。
- チャンバーの霜取り時間を長時間に設定しないでください。(目安として1回30分まで)
- 迅速氷結台 (オプション) は濡れ等がないか確認を行ってから使用してください。
- 使用電源に漏電ブレーカーを取り付ける場合、商用周波数 (50～60Hz) 以外の不必要な高周波成分の電流で作動しない漏電ブレーカーを使用してください。

貯蔵・保管方法・使用期間等

- 直射日光を避けて保管してください。
- 換気が十分な場所で保管してください。
- 酸、塩基ガスが充満する場所での保管は避けてください。
- 有機溶剤ガスが充満する場所はさけてください。
- 耐用年数5年 (法定耐用年数)
- 適正使用、定期点検を行う事

包装

- 1台単位で包装する。

資料請求先

- 白井松器械株式会社

取扱説明書を必ずご照参下さい

販売元

白井松器械株式会社 本社:大阪

〒540-0003

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-19-16

製造元

Tel (06)-6942-4522 (担当)

Fax (06)-6942-4105

Bright Instrument Co Ltd・St Margarets Way・

Huntingdon・Cambridgeshire・PE29 6EU・England

Tel:+44(0)1480 454528/451980/451499

Fax:+44(0)1480 456031・