

機械器具27 一般医療機器 クリオスタット・マイクローム

ブライト OTF5000

(販売名)

内臓回転式マイクローム:ブライト マイクローム5040



警告

本機を分解・解体しないでください。

禁忌・禁止

- 使用時以外は専用のケースで保管するかナイフガードをしてください。
- 付属品のクライオMベッド、マイクロームオイルを取扱う時は目や口に入らないよう注意してください。
- 本機の設置には様々な要件を満たす必要がある為、専門知識のある人以外設置しないようにしてください。
- 迅速凍結台を使用する場合は、充分に手指を保護してください。
- 試料の脱着時はハンドルを固定し行ってください。
- マイクローム刀の取り扱いには充分注意してください。

形状

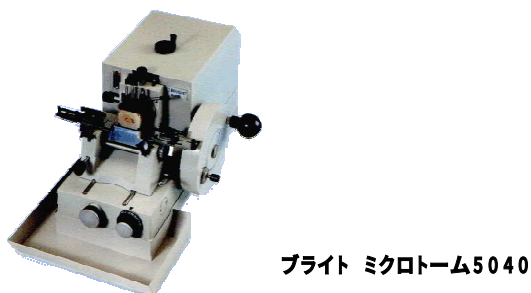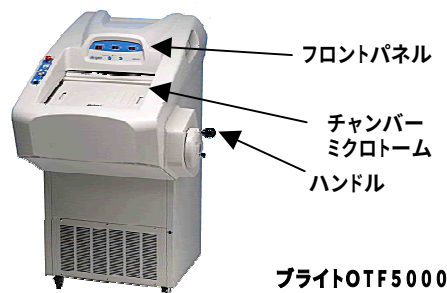

使用目的・適応

- 病理組織診断

品目仕様

- クリオスタットOTF5000型
- 冷凍機:密閉式コンプレッサー 100~115V 50/60Hz
540W HFCガス
- 内マイクローム 5040型、470×190×250(mm)
- ワンタッチ替刃ホルダーブロック付
- 自動送り範囲 0.5~30ミクロン、0.5目盛 (オプション多)
- チャンバー内部:材質 ステンレス鋼製
設定最低温度 -35℃
- 外装:ポリマーコーティング鋼板製
- 重量:120kg (標準型) 140kg (電動式切裁型)
- 寸法:880×840×1250 (mm)
- 電源:100V 15A 単独電源、E.C.、(LT型20~30A)
- 付属装備品:デフロストタイマー、照明、
超迅速凍結台、ナイトカバー

操作方法・使用方法

本機の操作、使用方法は取扱説明書を参照して使用してください。

使用上の注意

- 内部装置に触れると感電の恐れがありますので注意してください。
- 消毒方法には十分注意して行ってください。
- チャンバーの霜取り時間を長時間に設定しないでください。(目安として1回30分まで)
- 迅速氷結台 (オプション) は濡れ等がないか確認を行ってから使用してください。
- 使用電源に漏電ブレーカーを取り付ける場合、商用周波数 (50~60Hz) 以外の不必要な高周波成分の電流で作動しない漏電ブレーカーを使用してください。

貯蔵・保管方法・使用期間等

- 直射日光を避けて保管してください。
- 換気が十分な場所で保管してください。
- 酸、塩基ガスが充満する場所での保管は避けてください。
- 有機溶剤ガスが充満する場所はさけてください。
- 耐用年数5年 (法定耐用年数)
適正使用、定期点検を行う事

包装

- 1台単位で包装する。

取扱説明書を必ずご照参下さい

資料請求先

■白井松器械株式会社

販売元

白井松器械株式会社 本社：大阪

〒540-0003

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-19-16

製造元

Tel (06) - 6942-4522 (担当)

Fax (06) - 6942-4105

Bright Instrument Co Ltd・St Margarets Way・

Huntingdon・Cambridgeshire・PE29 6EU・England

Tel:+44(0)1480 454528/451980/451499

Fax:+44(0)1480 456031・