

機械器具27 一般医療機器 クリオスタット・マイクローム

ブライト 7500

(販売名)


警告

本機を分解・解体しないでください。

禁忌・禁止

- 使用時以外は専用のケースで保管するかナイフガードをしてください。
- 付属品のクライオMベッド、マイクロームオイルを取扱う時は目や口に入らないよう注意してください。
- 本機の設置には様々な要件を満たす必要がある為、専門知識のある人以外設置しないようにしてください。
- 迅速凍結台を使用する場合は、充分に手指を保護してください。
- 試料の脱着時はハンドルを固定し行ってください。
- マイクローム刀の取り扱いには充分注意してください。

形状

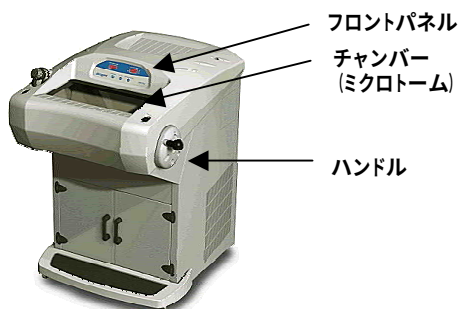

使用目的・適応

- 病理組織診断

品目仕様

- 7500型(本体)
- 電源/100～110V 50/60Hz 15A単独電源
- 電源ヒューズ/15A
- 冷凍機/密閉型110～115V540W 環境対応冷媒使用
- チャンバー用温度調節機/20～-35℃ LED表示
- 殺菌・消毒洗浄時 35℃±5℃ ホットガスデフロスト
- マイクローム/ラジアルカッティング方式
- ミクロン設定/デジタルスイッチによる0～35ミクロン
- トリミング用切片厚呼び出し機能付き
- 最大切截可能/37mm
- 試料移動方式/電動、手動 面合せ トリミング リセット用

試料オリエント/10度角
試料前後ストローク/18mm
ナイフブロック移動距離/22mmまで
カール防止板アセンブリー/微動調節器、着脱化
外寸/(770ハンドル付き) 640×905×1100 (mm)
(チャンバー) 455×285 (mm)
重量/120kg
付属装備品: 替刃ホルダー及びフェザーS35替刃
容器2リットル(2個) 容器5リットル
試料台22mm(2個) 試料台37mm
ブラシ 包埋剤 ベラスコープ(5セット)

操作方法・使用方法

本機の操作、使用方法は取扱説明書を参照して使用してください。

使用上の注意

- 内部装置に触れると感電の恐れがありますので注意してください。
- 消毒方法には十分注意して行ってください。
- チャンバーの霜取り時間を長時間に設定しないでください。(目安として1回30分まで)
- 迅速凍結台(オプション)は濡れ等がないか確認を行ってから使用してください。
- 使用電源に漏電ブレーカーを取り付ける場合、商用周波数(50～60Hz)以外の不必要な高周波成分の電流で作動しない漏電ブレーカーを使用してください。

貯蔵・保管方法・使用期間等

- 直射日光を避けて保管してください。
- 換気が十分な場所で保管してください。
- 酸、塩基ガスが充満する場所での保管は避けてください。
- 有機溶剤ガスが充満する場所はさけてください。
- 耐用年数5年(法定耐用年数)
- 適正使用、定期点検を行う事

包装

- 1台単位で包装する。

資料請求先

- 白井松器械株式会社

販売元

白井松器械株式会社 本社:大阪

〒540-0003

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-19-16

製造元

Tel (06) - 6942-4522 (担当)

Fax (06) - 6942-4105

Bright Instrument Co Ltd・St Margarets Way・

Huntingdon・Cambridgeshire・PE29 6EU・England

Tel:+44(0)1480 454528/451980/451499

Fax:+44(0)1480 456031・