

特定保守管理医療機器 プレパレート自動封入機 RCM-9000

【警告】


1. 装置内部には電子機器や高電圧になる部品もありますので、分解はしないこと。

【禁忌・禁止】

1. 危険ですので、動作中には、可動部分を開放することや、可動部分への接触することはいけません。
2. 感電の恐れがありますので、濡れた状態での電気関連部品への接触は避けてください。
3. 故障、火災、感電の原因になりますので、本体を濡らさないようにしてください。

【形状・構造及び原理等】

形状

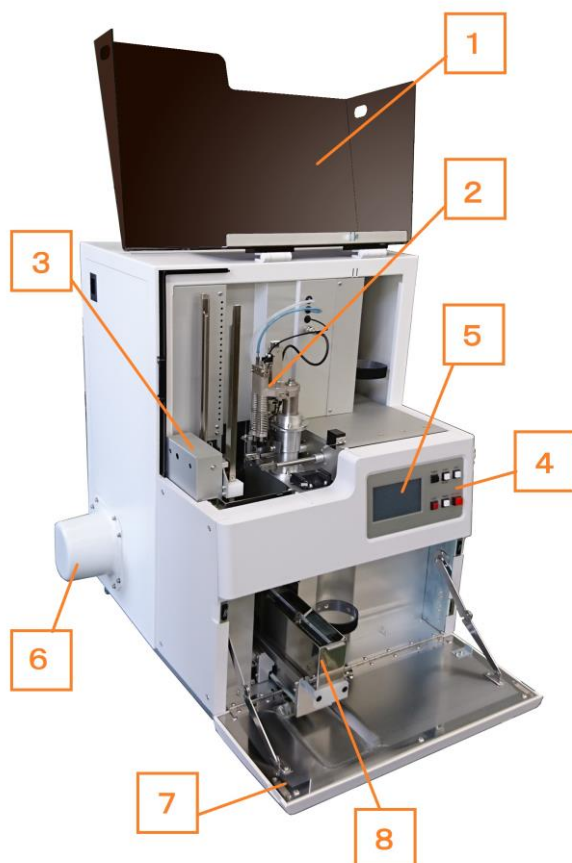

構造・構成ユニット

1	トップカバー
2	ディスペンサー
3	内蔵乾燥ファン
4	操作パネル
5	タッチパネルディスプレイ
6	排気ファン
7	フロントドア
8	バスケットコンテナ

機能

<品目仕様等>

外形寸法	W495×D540×H680(mm)
重量	62 kg
消費電力	100-240V 50/60Hz 600VA
スライド産出量	最大 300 枚/時間
分注容量	0.04~0.2cc/1 分注
粘度	550cps 推奨
封入剤コンテナ	500ml までの市販封入剤容器
ディスプレイ	TFT カラーLCD
スライドガラス積載容量	最大 60 枚
カバーガラス積載容量	最大 200 枚

<適合規格>

EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、
EN 61800-3 、EN 61131-2

作動・動作原理

封入装置である本機器は、本体に内蔵されてい IC プログラムシステムにより制御され、プログラム設定を行うことで自動的にスライドガラスへ封入剤を分注し、カバーガラスで封入処理を行う装置です。

【使用目的又は効果】

病理検査の組織標本や細胞診、血液検査等の標本を作製する為の封入作業を行う装置。

【使用方法等】

1. 封入剤ボトルの残量確認を行う。
2. バスケットコンテナに、適切な試薬を入れる。
3. バスケットにスライドガラスをセットする。
4. スライドガラスをセットしたバスケットをバスケットコンテナに設置する。
5. カバーガラスを収納ケースにセットする。
6. 操作パネル「POWER」ボタンを押し、電源を入れる。
7. タッチパネルにて自動運転の設定を行う。
8. 封入剤の吐出量を確認し、テスト封入を行う。
9. 操作パネル「START」ボタンを押し、封入を行う。
10. スライドガラス収納棚及びバスケットコンテナを取り出す。
11. 電源を OFF にする。

(メイン画面表示時に「POWER」ボタンを押し。)

※基本操作及び使用方法・プログラム操作方法については、本機に付属されている「取扱説明書」を必ず参照・熟読してからご使用ください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 装置動作中は必ず本器のトップカバー及びフロントドアを閉めてから使用してください。
2. 装置動作中に機器内部に手などを入れないでください。
3. 機器本体の異常を感じたときは、速やかに電源をお切りください。
4. 封入に使用する薬剤は身体への影響や引火性の高いものがありますので、必ず排気ダクトへ接続してください。

その他の注意

1. 装置を作動させる前に、必ず装置の外観の異常などが無いか確認してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

2. 装置の性質上、電気を使用しますので、感電・ショートなどに十分注意してください。
3. 本装置は高さ調整用の足がついていますが、各足とも5mm 以上は伸ばさないでください。高さ調整後はロックナットで固定してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 通常埃のない清潔で、直射日光に露出しない場所に保管してください。
- ・ 適正保管(使用)温度：10℃～40℃
- ・ 適正保管(使用)湿度：最大 80%

耐用期間・使用期間

標準耐用年数：約 5 年

（当社推奨の適正使用、保守メンテナンス等維持実施時）

【取扱い上の注意】

- ・ 高温、多湿環境下など、機器に不具合を発生させる環境、条件下での可動は避けてください。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・ 機器の日常点検、洗浄清掃方法等は取扱説明書に記載されておりますので、必ずご参照ください。
- ・ 取扱説明書等に記載されているお客様実施事項を除いての、消耗品交換及び修理点検等の作業は弊社指定専門業者又は、弊社サービスへご依頼ください。
- ・ 日常点検において、異常などに気付かれた場合は、必ず弊社サービス等にご連絡ください。

業者による保守点検事項

本装置は、特定保守管理医療機器に該当しますので、修理などは修理業許可を取得している専門業者のみが行うことができます。詳しくは弊社担当者までご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

白井松器械株式会社

〒540-0003

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目 19 番 16 号

Tel:06-6942-4181 Fax:06-6942-4566

＜製造業者＞

株式会社システム・ワン

〒370-2307

群馬県富岡市藤木 274 番地 1

Tel:0274-67-7613 Fax:0274-67-7623

＜販売業者＞

	技術と信頼でライフ・サイエンスをサポートする HANDEX 白井松器械株式会社
大 阪:〒540-0003	大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 1-19-16
	Tel 06-6942-4181(代) FAX 06-6942-4566
東 京:〒123-0873	東京都足立区扇 2-14-32
	Tel 03-5647-1570(代) FAX 03-5647-1572
北関東:〒133-0051	東京都江戸川区北小岩 5-6-9
	Tel 03-6458-0697(代) FAX 03-6458-0698
九 州:〒812-0006	福岡県福岡市博多区上牟田 1-5-20
	Tel 092-477-2280(代) FAX 092-477-3225
H	P:http://handex.jp/
E-mail:	info_web@handex.jp

取扱説明書を必ずご参照ください。