

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科印象材用シリンジ（JMDN コード 35860000）  
**カートシリンジ**


【禁忌・禁止】\*\*

1. 禁忌の薬剤：次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロヘキシジンは金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。

- ・薬液消毒を行うときは、薬剤の添付書類にかかれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ・オートクレーブ滅菌は乾燥工程を除き使用可能。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、サビ、シミ等の原因となることがある。
- ・腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】\*

1) 外観図

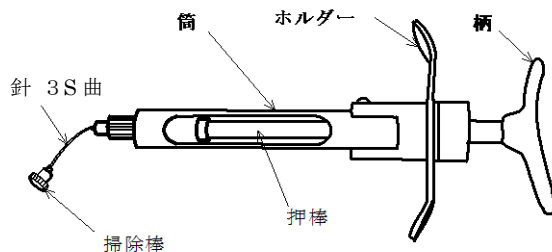

2) 針の種類/針径

- ① 2 S 曲/0.8 mm ② 3 S 曲/1.2 mm ③ 3 S 直/1.2 mm

【使用目的又は効果】\*

使用目的

印象の採得をする寒天印象材の注入器です。

【保管方法及び使用期間】

貯蔵・保管方法

- 1) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 押棒のゴムパッキン（器具内部装着）は劣化しますので、定期的に交換すること。
- 2) 針部のネジ磨耗、折損などを使用前に有無の確認をし、発見された場合は交換するか、使用をとりやめること。
- 3) 筒部のネジ磨耗を使用前に有無の確認をし、発見された場合は使用をとりやめること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*

製造販売元

城田電気炉材株式会社

TEL 03-3330-6370

FAX 03-3330-6332

発売元

株式会社デントロニクス

TEL 03-3209-7121

FAX 03-3232-6764

【使用方法等】

- 1) 柄をストップするまで引き上げ、引っ張りながら横に倒します。
- 2) ドライコンディショナーに保存されている寒天印象材を取り出し、カートリッジの筒に入れます。
- 3) 横になっている柄を引っ張りながら元の位置に戻します。
- 4) 柄を押し込みます。
- 5) 使用に応じた針を選択し、筒に装着します。  
（針はしっかりと装着し、カートリッジを挿入した時、針のカット面がカートリッジのゴム栓を抜いているのを確認してください。また、針には、掃除棒が挿入されていることを確認してください。）
- 6) 掃除棒を引き抜き、柄を押し込み、手に寒天印象材を押し出し寒天印象材の溶解具合を確認してから使用してください。

【使用上の注意】

- 1) 本器具は、印象採得用途以外には使用しないこと。
- 2) 本器具は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- 3) 針部を外す時は、根元の部分を保持して、筒を回すこと。針部分に無理な力がかかると破損につながります。
- 4) 筒部のネジ磨耗、針部の折損など使用前に有無の確認をし、発見された場合は使用をとりやめること。
- 5) 本器具の落下、取り扱いの不注意は破損の原因になるので特に取り扱いに注意すること。
- 6) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
  - ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で金属腐食を起こすことがある。