


ラボマックス 500

【警告】

1. 歯科技工用以外使用しないこと。
2. 故障や異常が見られた場合は、直ちに器具の使用を中止すること。
3. 使用中は炉体が熱くなります。火傷や周りに可燃性のものを置かないよう注意すること。
4. リングの焼却中には、ガスが発生しますので喚起をすること。
5. ご使用に際しては、必ず使用説明書を熟読して、ご使用になるようお願いいたします。

【形状・構造及び原理等】*

外観図

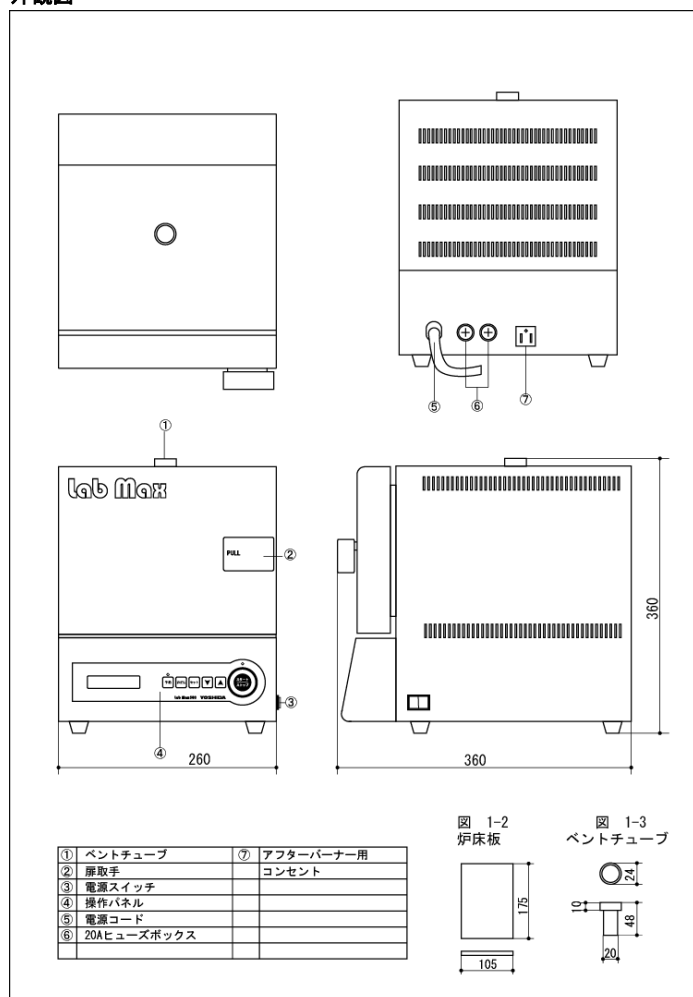

2) 本体寸法及び重量

- 1 寸法 W260×H360×D360 mm
- 2 重量 11 kg

3) 作動原理

鋼板製の筐体の中にファインセラミックで成形された炉体を有し、

自動温度コントローラーで制御された内蔵の電熱ヒーターの加熱を利用し、ステンリングの中に特殊な埋没材で埋め込まれたワックスで作られるインレーやクラウン、ブリッジの型を焼却し、鑄型を制作する為の機器。

4) 電氣的定格

- 1 定格電圧 単相 AC 100V (50/60Hz)
- 2 定格消費電力 1.2 KW

5) 性能

- 1 温度上昇 (6) 室温～1000℃約 20 分
- 2 温度設定 (係留温度) 0～1000℃
- 3 温度補正 ±100℃
- 4 リバーナー電源 AC100V300W 以下メインスイッチ連動

【使用目的又は効果】*

使用目的


ワックスで作られるインレーやクラウン、ブリッジの型を焼却し鑄型を製作する為の機器

【使用方法等】**

機器の詳細な操作方法及び使用方法は、付属の取扱説明書使用手順の項を必ずお読み下さい。

設置方法

- 1) 他の機器や壁との間には左右、奥行き共に 50cm 以上開けて下さい。また天井までは 150cm 以上になるように設置し、周囲には燃えやすい物を置かないで下さい。直射日光を受けると、本機の表面温度が異常に上昇したり、表示が見えにくくなりますので避けて下さい。
- 2) 機器の取付、設置は専門の担当者(当社または 当社指定の業者)が行います。
- 3) D 種接地工事 (100Ω 以下) を必ず施すこと。

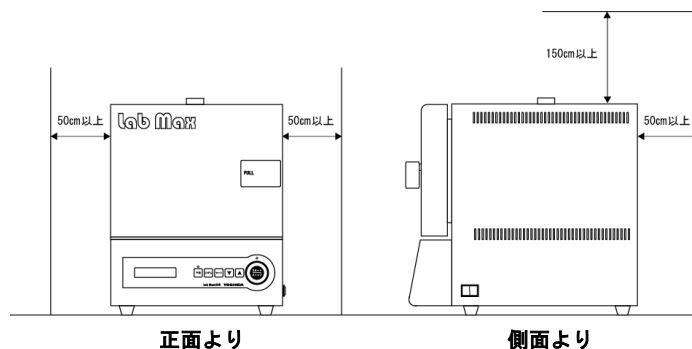

【保管方法及び有効期間等】*

1) 貯蔵、保管方法

- 1) 水のかからない場所に保管すること。
- 2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分を含んだ空気などにより悪影響を生じる恐れのない場所に保管すること。
- 3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意すること。
- 4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

2) 耐用期間

指定の保守、点検並びに消耗部品の交換した場合の耐用期間:6 年
(自己認証による)

【保守、点検に係わる事項】*

〈使用者による保守点検事項(日常点検)〉

本製品を安全にご利用頂くためにご使用前には点検を行って下さい。

- 1) 電源プラグが緩み無くコンセントに接続されているか、また接続部分にホコリなどが付着していないか確認して下さい。
- 2) 炉内の埋没材などのゴミは定期的清掃し取り除いて下さい。
- 3) 扉が確実にロックされているか必ず確認して下さい。
- 4) 機器に異常がある場合は使用を中止し、代理店又はヨシダ各営業所にご相談下さい。

〈業者による保守点検事項〉

- 1) 安全にご利用いただくためにメーカーによる定期的な点検をお勧めします。
- 2) 日常点検、又はご使用中に異常が有りましたら直ちにご使用を中止し代理店又はヨシダ各営業所に点検をご依頼ください。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者

城田電気炉材株式会社
TEL 03-3330-6370

販売業者

株式会社ヨシダ
TEL 03-3845-2931