


機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科材料加温器（JMDN コード 70720000）

## カプリ

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 外観図

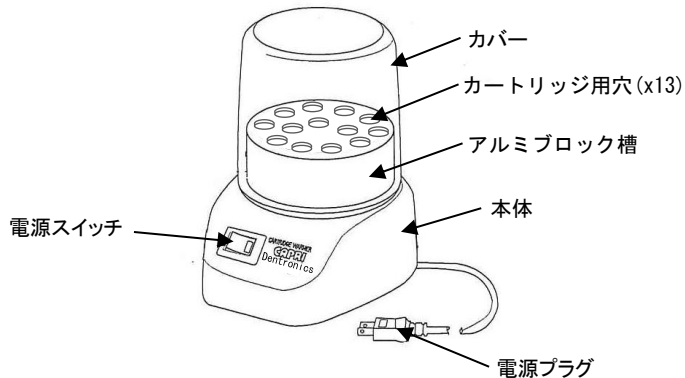

#### 2) 本体及び重量

- ①寸法 W90xD118xH127 (mm)
- ②重量 約 0.5Kg（本体のみ）

#### 3) 動作原理

本体に内蔵されたヒーターによってアルミブロック槽を加熱する事で、アルミブロック槽に挿入された麻酔カートリッジを一定温度に加温する。

#### 4) 電源電圧・消費電力

- 1) 定格電圧 AC100V 50/60Hz
- 2) 消費電力 10W

### 【使用目又は効果】

#### 使用目的

歯科材料等を適切な使用状態に維持するために加温する装置。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

- 1) 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2) 麻酔カートリッジを差し込みます。  
※その日に必要な数の麻酔カートリッジを、カートリッジ用穴に差し込みます。
- 3) 電源を入れます。
- 4) カバーをかぶせます。  
※カバーをかぶせないと温度が低くなる可能性があります。
- 5) 全ての作業が終わったら、電源を切ります。  
※長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 【使用上の注意】

- 1) 麻酔カートリッジ以外は、使用しないでください。
- 2) 麻酔カートリッジは、長時間温めておくと変質することがあります。
- 3) 正確な温度を維持するため、カートリッジ穴内にゴミ等がたまらないようにしてください。月に 1～2 回程度の清掃をおすすめします。
- 4) 底蓋の通風口がふさがれないよう、平らで固い場所に置いて使用してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り、使用開始後 5 年間。（自己認証）

### 【保守・点検に係わる事項】

- 1) 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。  
※アルミブロック槽に手で触れて熱く感じられる場合は、十分に冷えるまで待ちます。
- 2) 穴内に麻酔カートリッジがある場合は、外に出します。
- 3) 穴を下向きにして、綿棒などで中のゴミをかき出し、軽く水を含ませた綿棒で細かいゴミを拭き取ります。
- 4) 本体・カバーはガーゼなど柔らかい布に消毒用エタノールを含ませて清拭してください。  
※消毒用エタノール等を直接スプレーすることはおやめください。
- 5) 本体・カバーはオートクレーブなどの機器類は使用しないでください。故障の原因になります。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

城田電気炉材株式会社  
TEL 03-3330-6370

#### 発売元

株式会社デントロニクス  
TEL 03-3209-7121