

類別：機 械 器 具 2 5 医 療 用 鏡

特定保守管理医療機器 一般的名称：内視鏡用ビデオカメラ 一般医療機器 JMDNコード：35958000

デジタルムービーカメラ

SK-1057-PHX

【警告】＊＊

「取扱説明書」に記載の「警告」に準ずる。

本添付文書と「取扱説明書」を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。


【禁忌・禁止】

1. 機器の保管は高温多湿を避けること。
2. 機器の保管は直射日光、ほこり、塩分、イオウ分を避けること。
3. 振動、衝撃を与えないよう特に注意すること。

【形状・構造等】

構 成

1. カメラ本体
2. カメラアダプター
3. MOS（固体撮像素子）
4. 液晶モニター

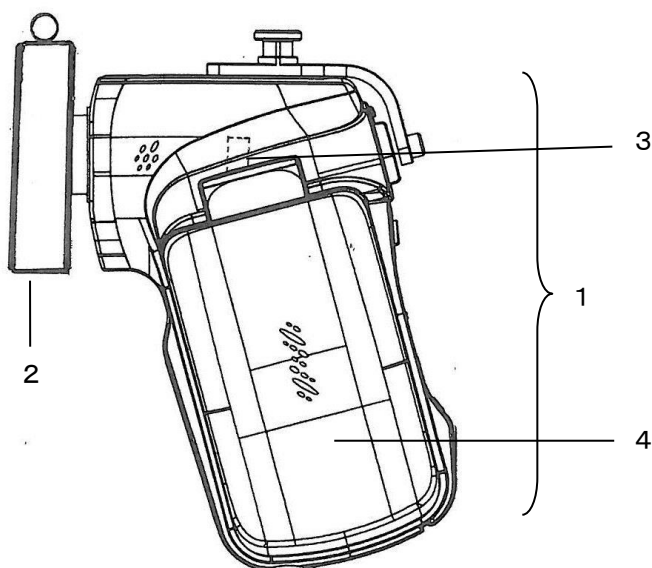

【性能・使用目的・効能又は効果】

軟性又は硬性内視鏡のアイピースに、着脱可能なアダプターにより接続されるムービーカメラである。

光学映像をMOS（固体撮像素子）により電子画像に変換し、一体型モニターで観察する。

術者はスコープを覗く事なく患部を観察、手術する事が可能となり、診断性の向上とSDメモリーカードによる記録の保全、清潔の確保等の利点がある。

アダプターは絶縁構造のため、内視鏡とムービーカメラとは電氣的に完全に遮断され、きわめて安全である。

【操作方法又は使用方法】

1. 準 備**

ムービーカメラの背面扉を確実に閉め、ロックレバーをロックし密閉します。

その他詳細は取扱説明書の「準備」を参照して下さい。

2. 操 作

＊2－1 ムービーカメラにSDメモリーカード及びバッテリーを装着後、カメラ先端部に内視鏡をセットし、ズームにより映像の大きさを選定します。

2－2 内視鏡基部のジョイント部にライトガイドを取付け、外部光源と接続、点灯します。

2－3 ホワイトバランスは自動追尾型のため操作は必要ありません。

2－4 液晶モニターにて患部を観察、チェックします。

3. 使用後＊

ムービーカメラのメインスイッチをOFFにした後内視鏡を本体より抜去して、アルコールガーゼ等でカメラ表面の汚れを清拭してからバッテリーを取り外して下さい。

【使用上の注意】

機器を使用する前には次の事項に注意して下さい。

（１）ムービーカメラにSDメモリーカード、バッテリーを装着し、静止画、動画の録再生が正常に動作するか必ず確認して下さい。

（２）液晶画面に汚れがないか確認して下さい。

（３）機器の併用はノイズ等の原因になりますので十分注意して下さい。

【作動・動作原理】

内視鏡からの光学映像は、ムービーカメラ内部のMOS（固体撮像素子）により電気信号に変換されます。電気信号はデジタル処理され、最良の映像信号となり一体型液晶モニターに表示されます。

【取扱い上の注意】

- (1) 直射日光及び高温多湿を避けて保管して下さい。又、落下には特に注意して下さい。
- (2) 使用後はアルコールガーゼ等で体液、血液等を拭き取り、乾ガーゼで湿気を除去して下さい。
- (3) 長時間使用しない時は、SDメモリーカード及びバッテリーは取り外して保管して下さい。

【包装】

ダンボール箱入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：(有)新興光器製作所

[営業所・工場]

住所：東京都文京区本郷2-12-2

電話：03-3811-4194

製造業者：(有)新興光器製作所

[販売元]

パナソニック ヘルスケア株式会社

お客様ご相談センター（365日 受付9時～20時）

電話 フリーダイヤル：0120-878-211

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

取扱説明書を必ずご参照ください。