

*【禁忌・禁止】

◎ 適用対象（患者）

次の患者には使用しないこと。

- ・ペースメーカー使用者【誤動作するおそれがあるため。】
- ・妊婦、産婦【安全性が確認されていないため。】
- ・出血素因の高い人【出血のコントロールが難しいため。】


次の部位には照射しないこと。

- ・悪性腫瘍【活性化させるおそれがあるため。】
- ・眼【失明のおそれがあるため。】
- ・甲状腺【機能を低下させるおそれがあるため。】
- ・性腺部【機能を低下させるおそれがあるため。】

【形状・構造等及び原理等】

◎ 構成

本装置は、本体と本体に設けられたファイバ導光部およびハンドピースから構成され、本体にはフットスイッチが接続されています。

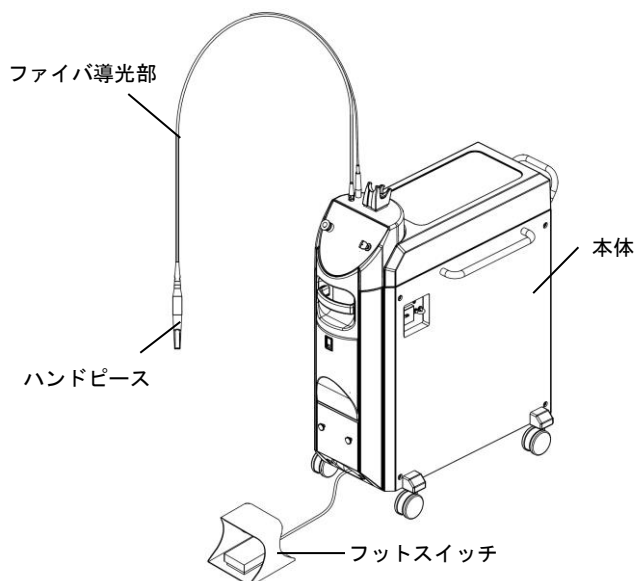

本体寸法：300 (W) × 720mm (D) × 887mm (H) ±10 %

◎ 機器の分類

- ・電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器
- ・電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部
- ・レーザー製品のクラス分け：クラス 4 レーザ製品
- ・水の有害な浸入に対する保護の程度の分類

本体：IPX 0

フットスイッチ：IPX 1

◎ 本装置の作動原理

本装置は、レーザー発振器、ファイバ導光部、レーザー電源および制御部に大別され、それぞれが次のような役割を担い作動しています。レーザー発振器は、レーザー媒質であるルビーロッドにフラッシュランプ閃光による光エネルギーを与えることでレーザーを発生させる機能と、そのレーザーの進行方向を調整してファイバへ入光させる機能を持ちます。

ファイバ導光部は、湾曲されたフレキシブルチューブにファイバを通して構成され、ハンドピースの位置や向きに関わらず、レーザーを導光することができます。これにより、ハンドピースからレーザーを放出することが可能になります。

レーザーの発生源となるフラッシュランプ閃光は、蓄えた電気エネルギーを短時間にフラッシュランプへ放出することにより発生します。その蓄電・放電を担うのがレーザー電源です。また、フラッシュランプへ放出する電気エネルギーの大部分は熱に変わるため、フラッシュランプやレーザー媒質の過熱を冷却水で冷却します。これら装置の全動作や状態を制御部で制御・監視します。

【使用目的又は効果】

異所性蒙古斑、扁平母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、色素性母斑、雀卵斑、日光花弁状色素斑等の色素性皮膚疾患の治療。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- (1) 電源コードのプラグを電源に接続します。
- (2) リモートインタロックコネクタの接続状態を確認します。
- (3) フットスイッチの接続状態を確認します。

2. 使用・操作手順

- (1) ブレーカをオンにします。
- (2) かぎ（鍵）を挿し、スタートスイッチをオンにします。
- (3) レーザ出力設定スイッチでレーザー出力を設定します。
- (4) 照射モード切替スイッチで照射モード（シングル/リピート）を選択します。
- (5) リピートを選択した場合は繰返し数設定スイッチで、繰返し数を設定します。
- (6) ハンドピースを置き台から取り出します。
- (7) スタンバイ/レディスイッチを操作し、フットスイッチ操作によりレーザー照射できる状態（レディ）にします。
- (8) ハンドピース先端を照射部位へ向け、フットスイッチを踏み込んでレーザー照射します。
- (9) 必要に応じて、ガイド光設定を変更します。

3. 停止手順

- (1) かぎ（鍵）をオフにし、装置から抜きます。
- (2) ブレーカをオフにし、電源プラグを抜きます。
- (3) 装置の停止に緊急性を要するときは、レーザーストップスイッチを押します。復帰させる場合は、本スイッチを回転させて解除してから操作を行います。

*【使用上の注意】

◎ 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）


- ・光線に対して過敏な患者

◎ 重要な基本的注意

- ・必ず保護眼鏡を着用してください。レーザーが直接眼に入ると失明もしくは視力低下の危険性があります。

- ・保護眼鏡を着用していても、ハンドピースの先端を眼に向けないでください。
- ・黒子、体毛、毛髪等皮膚上の黒い部分への照射は、熱傷のおそれがあります。
- ・可燃物や可燃性ガス及び液体は、引火や爆発の危険性があります。
- ・義歯や金属インプラント等の反射物に照射すると、レーザが反射して意図しない箇所に照射される危険性があります。
- ・過剰なレーザ出力での照射や、施術間隔を誤ると色素沈着、色素脱失、瘢痕化を引き起こす危険性があります。
- ・煙や蒸散粒子に細菌等が付着して飛散する危険性があります。

◎ 販売店

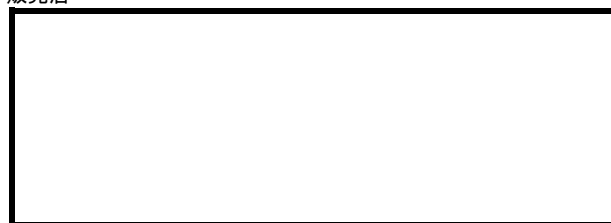

◎ その他の有害事象

- ・失明もしくは視力低下
- ・熱傷
- ・誤照射や反射による危険
- ・色素沈着、色素脱失、瘢痕化
- ・細菌等の飛散

◎ 高齢者への適用

体力の低下している高齢者へのレーザ照射は、慎重に行ってください。

◎ 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、産婦へのレーザ照射は、安全性が確認されていないため行わないでください。

【保管方法及び使用期間等】

◎ 耐用期間

定期的な保守・点検を行い、適切に消耗品を交換した場合の標準的な耐用期間は7年です（自己認証による）。

【保守・点検に係る事項】

◎ 使用者による保守点検事項

点検項目	点検頻度
<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドピースの汚れ、損傷 ・保護眼鏡の汚れ、損傷 ・本体の洗浄、消毒 	使用毎
<ul style="list-style-type: none"> ・コード類、プラグの状態確認 ・主要動作確認 ・障害防止対策 	1ヶ月に1回以上

※点検方法等の詳細は取扱説明書を参照してください。

◎ 業者による保守点検事項

点検項目	点検頻度
<ul style="list-style-type: none"> ・レーザ出力校正 ・光学部品点検・交換 ・消耗部品交換 	1年に1回以上

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

◎ 製造販売元



澁谷工業株式会社

〒920-0054 石川県金沢市若宮2丁目232番地

TEL：(076)262-2208

◎ 販売元



株式会社エムエムアンドニーク

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-16-6

TEL：(03)3865-6575（代表）

FAX：(03)3865-6585