


医療用品 06 視力表及び色盲検査表
一般医療機器 アムスラーチャート (JMDN コード 32786000)

アムスラーチャート

【形状・構造及び原理等】

下記に外観図を示す。

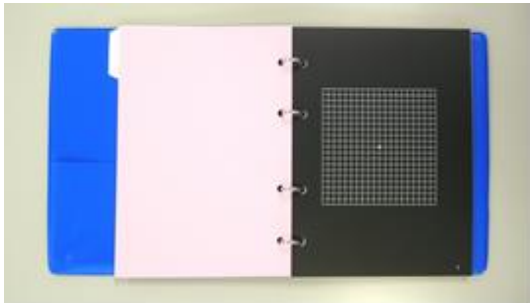

＜構成＞

本品はアルバム型で 7 枚の検査表で構成されている。

＜原理＞

本品は、黒字に白、黒字に赤、白地に黒で 5mm おき(視角 1° おき)に引かれた基盤目、横線、点状班の全 7 表からなる。それらを被検者に見せ、そのパターンの乱れから中心視野 20° × 20° の変視症、中心暗点を自覚的に検出させる。

黄斑疾患の初期症状および治療効果の把握に適する。

＜仕様＞

(1) 検査表

- No.1 標準検査表(黒地に白線)
- No.2 中心の見えない患者用
- No.3 標準検査表(黒地に赤線)、No.4 暗点検出用
- No.5 変視症検出用、No.6 変視症検出用
- No.7 傍中心部精密検出用

(2) 検査範囲: 中心視野 20° × 20°

(3) 検査距離: 28～30 cm

【使用目的又は効果】

中心部 10° 以内の視野異常の検出。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照。

- (1) 検査は散瞳したり、目薬を点眼する前に行う。
- (2) 被検者は片眼を遮蔽し必要に応じ矯正レンズを装用する。
- (3) 被検者に No.1 の検査表の中心にある固視点を固視させたうえで以下の設問に従って検査を進めていく。

問1 中心の固視点が見えるか？

もし固視点が見えない場合は No.2 の検査表を用いその対角線を、中心を固視する助けとする。

問2 一番外側の四角が全部見えるか？

問3 編み目全部が完全に見えるか？又は網目の中に穴や斑点の様な切れ目があるか？

網目の中に穴や斑点の様な切れ目が見える場合、No.4 の検査表を用いると暗点の認識を容易にする。

問4 線が歪んでいないか？編み目の大きさが均一か？

この設問では変視症の症状を探る。暗点がない変視症の場合、No.5 又は No.6 の検査表を用いて横、縦、必要に応じて斜めに提示しての検査が有用。

問5 動き、揺れ、輝き、色や色づいたものはないか？

問6 異常部位の位置は中心位置からどの距離にあるか？ 眼を中心の固視点から動かさない状態で中心点から異常部位までの間にいくつの正常な四角が見えるか？

中心部の視覚異常の位置の特定には中心部が半分の網目になった No.7 の検査表を用いると便利である。又、非矯正の高度近視眼では、その遠点はこの No.7 の検査表を提示して検査をすると便利である。

- (4) 以上の 6 種の質問を検査の目的を理解したうえで要領よく行い、付属の記録紙に出来るだけ正確に記録する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (2) 本品の使用者は、医師及び医師の指示を受けた人、視能訓練士だけに限定すること。
- (3) 検査表面は、指等で触れないこと。
- (4) 通常の視力検査程度の照明下で検査し、均等に照明されること。
- (5) 検査距離は 28～30 cm を保つこと。
- (6) 検査表面に傷、汚れ、変色、及び色むらがある場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

常温に保管すること。但し、40℃以上の高温、5℃以下の低温及び 70%以上の湿度は避ける。

検査表の退色を防ぐため、検査表面に不必要な光が当たらないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 検査面には手を触れないこと。
- (2) 汚れた場合は、柔らかい布で軽くはらうこと。
洗浄用の液体や溶剤は決して使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03)3815-2611

外国製造業者 Keeler Ltd. イギリス

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03)3815-2611
株式会社 JFC セールスプラン TEL (03)5684-8531

取扱説明書を必ずご参照ください。