


医療用品 04 整形用品
一般医療機器 アイパッド (JMDN コード 11661000)

保護眼帯


【形状・構造及び原理等】

(代表例)


K 9-6000

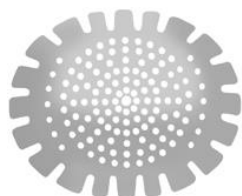

K 9-6010

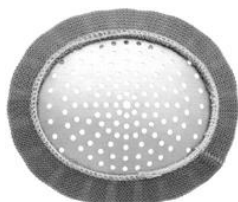

K 9-6050

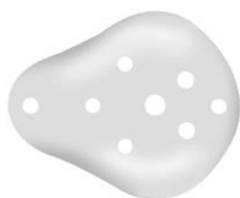

K 9-6100



原材料：アルミニウム、又は合成樹脂
ガーター部は布（天然ゴム含有）

【使用目的又は効果】

眼の保護又は分泌物の吸収に用いる。

【使用方法等】

使用前にキズ、汚れ、変形などの異常が無いことを確認。

眼瞼(まぶた)にあてがい、適宜固定する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 再使用に際しては必ず洗浄・消毒・点検をすること。
- (2) ガーター部は毎回交換すること。
- (3) この製品のガーター部には天然ゴムを使用しています。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

常温に保存

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- (3) 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには器具同士が接触して損傷することがないように注意をすること。
- (4) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを奨励する。
- (5) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
- (6) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、歯に異常がないか点検をすること。
- (7) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03)3815-2611

外国製造業者 KATENA PRODUCTS, INC.
アメリカ

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03)3815-2611
株式会社 JFC セールスプラン TEL (03)5684-8531

A4 サイズの添付文書が必要な方はお申し出下さい。