

医療用品 06 視力表及び色盲検査表

## 一般医療機器

視力表 (16800000) (コントラスト感度測定装置 (70092000))

販売名 **アキュパッド**

本器の視力検査において、検査距離によっては、表示された指標は JIS 規格から外れるものがあります。

(JIS 規格 視力検査装置 1.6 までは標準値の±5% 2.0 は±10%)


[illegible]

● : 範囲内      ● : 範囲外

### <構成>

詳細は取扱説明書「I 各部の名称及び外観図」を参照


タブレット本体(黒枠モデルの例)：

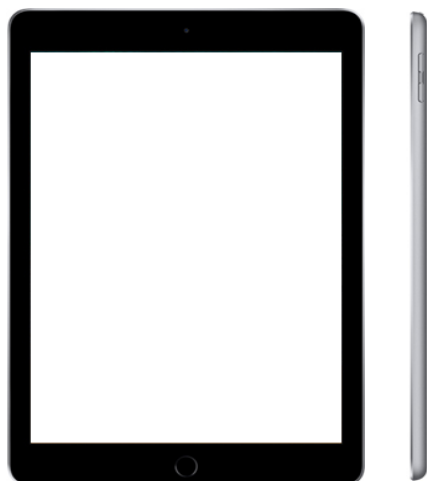

本体付属品：  
電源アダプター



\*付属品：  
accu-pad コントローラ

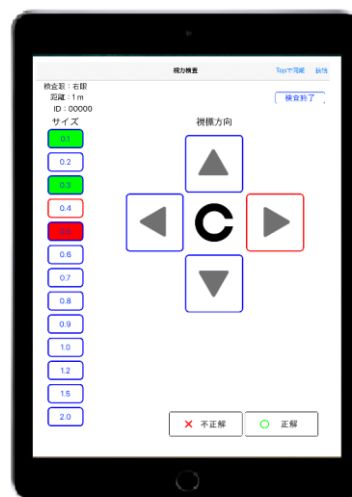

＜寸法・重量＞

タブレット本体：

W10 : 250 (L) × 170 (W) 470 g 以下

画面：9.5inch

取扱説明書を必ずご参照下さい。

付属品：



メガネ

#### <原理>

画面の偏光板を剥離したタブレット端末により、裸眼では白にしか見えない画面であるが、この剥離したものと同一の偏光フィルターを透すことにより、タブレット端末の画面が再び視認できるようになる原理を使用している。

従って、この偏光フィルターを装着したメガネ、全画面用フィルター及びプレミアムオクルーダを使用することにより、目的とする側の眼にのみ映像を見せる事が出来るようになることから、日常視に最も近い両眼開放状態にて片眼視力の評価が可能となる。

#### \*\*<動作環境（充電時を含む）>

温度：10℃～30℃

#### 【使用目的又は効果】

視力検査に用いる視力表とコントラスト感度を測定することを目的とし、視力及びコントラスト感度の視機能検査を複数の距離で検査し、夫々の視標の文字又は記号を手動に加えてバーコードリーダーを使用することにより、遠隔にて検査の指示が可能となる。

#### 【使用方法等】

被検眼に偏光フィルターをセットしたプレミアムオクルーダもしくはメガネ等をかけ、画面に表示される視標を見せることにより視機能の検査を行う。視標の操作は手動及びバーコードリーダーに所定のバーコードをかざすことにより行う。

プレミアムオクルーダ


検眼枠用  
フィルター

全画面用フィルター

バーコードリーダー

付属品：

バーコード

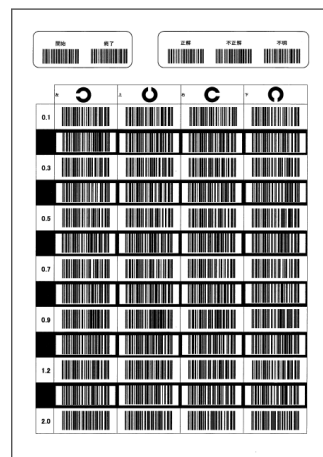

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

- ・本品は、使用する前に必ず取扱説明書の内容を理解熟知した上で取り扱うこと。
- ・各フィルターには表裏があります。誤った方向から覗いて検査すると正しい検査結果が得られません。必ず正しい方向で検査を行ってください。（取扱説明書 p 8 参照）

##### \*\*<その他の注意事項>

- ・本品が熱くなっている場合は、電源アダプターから取り外し、使用しないこと。
- ・本品内蔵の充電式電池の過充電、過放電を避けること。（以下のことに留意してください）
  - 使用後は電源アダプターから取り外すこと。
  - 何日も使用しないときは、システム終了操作を行い完全な OFF 状態にすること。
- ・本品はリチウムイオン電池を搭載しています、本品を処分又はリサイクルする場合は、地域の規制に従って行うこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

タブレット本体及び付属品は常温に保管すること。但し、80%以上の湿度は避ける。

##### \*\*<耐用期間>

4 年（自己認証による。充電式電池を除く）  
但し適切な保守点検及び修理を行っている場合に  
限る。

#### 【保守・点検に係る事項】

タブレット端末の画面及び付属品のフィルターは必要に応じてガラスクリーナーで清掃する。プレミアムオクルーダはアルコール消毒を基本とし、偏光レンズの清掃は光学レンズクリーニングクロスにて清掃すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパンフォーカス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18  
TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

**緊急連絡先**

ジャパンフォーカス株式会社  
TEL (03)3815-2611

株式会社 JFC セールスプラン  
TEL (03)5684-8531