

機械器具(29)電気手術器
一般的名称：マイクロ波メス JMDN コード：70650000
高度管理医療機器

「miraDry システム」の付属品 (テンプレート)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

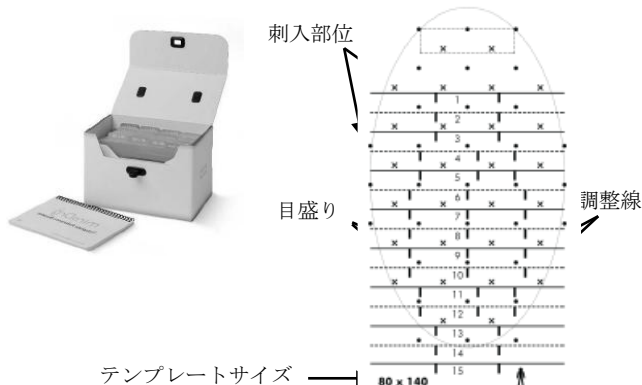

テンプレートは 17 種類ある。

	テンプレートサイズ (mm)
1	40 × 80
2	40 × 100
3	40 × 120
4	50 × 80
5	50 × 100
6	50 × 120
7	60 × 80
8	60 × 100
9	60 × 120
10	60 × 140
11	70 × 80
12	70 × 100
13	70 × 120
14	70 × 140
15	80 × 100
16	80 × 120
17	80 × 140

【使用目的又は効果】

マイクロ波により重度の原発性腋窩多汗症を治療するために使用する。

本品は、miraDry システムで使用する付属品であり、麻酔注射の位置及び治療箇所のマーキングに使用される。

【使用方法等】

併用する医療機器の添付文書【使用方法等】を確認したうえで使用すること。

1. テンプレートの使用方法

1) 腋窩部の計測

①テンプレート付属のサイジングスケールを腋窩に乗せ、腋窩部を測定し、サイジングスケールの穴の部分に印を付ける。

2) テンプレートの転写

①濃度 70%以上のアルコールで、腋窩を湿らせ、サイジングスケールで決定したサイズのテンプレートの穴と、皮膚に付けた印の位置を合わせてテンプレートを乗せる。テンプレートの上下、表裏を間違えないようにする。

②テンプレートの上から、さらに濃度 70%以上のアルコール含浸綿で湿らせ、転写する。転写されなかった部分又は薄い場合は、マーカーペンで追記する。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること。）

(1) 大豆アレルギーの患者[テンプレートのインクは大豆インクであり、大豆アレルギーが出る可能性がある]

2. 重要な基本的注意

(1) テンプレートは滅菌しないこと。
(2) 未使用時には、専用箱に入れて保管すること。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

高温多湿を避け、水濡れに注意し、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管すること。（取扱説明書を参照）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジェイメック

電話番号：03 (5688) 1803

製造業者：ミラドライ社

miraDry, Inc.

国名：米国