


ミキシングチップ(ブラウン)

【禁忌・禁止】

本品は、一度使用したもの、血液や唾液に触れたものを再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

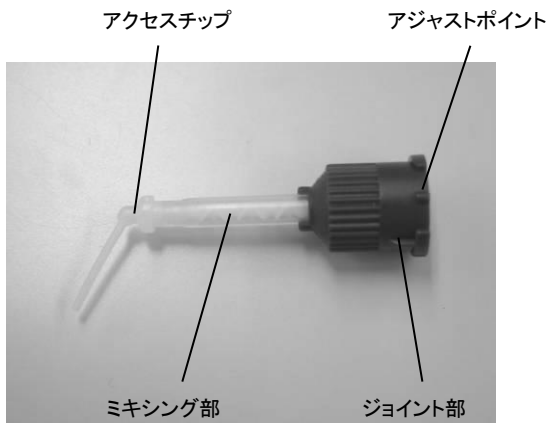

【使用目的又は効果】

ビルドイット FR[医療機器認証番号:21400BZY00278000 号] 4mL シリンジ等に充填されたレジンと練和

【効能又は効果に関連する使用上の注意】

ペントロン社製 4mL シリンジに装着できるよう設計されているため、25mL カートリッジ及び 50mL カートリッジ、その他の規格のカートリッジには装着できないので、注意すること。

【使用方法等】

1. シリンジのキャップの取り外し



シリンジのキャップを反時計方向に 45° 回転させ、シリンジに付与されたきざみ部とキャップの突起部を合わせて引き抜きます。

2. ミキシングチップ取り付け準備



練和紙上に少量のレジンを出し、ベースとキャタリストが等量出ていることを確認します。(等量出ている場合、硬化不良及び適正な効果が得られない場合がありますので注意してください。)

3. ミキシングチップの装着



シリンジに付与されたきざみ部とミキシングチップのジョイント部にあるアジャストポイントを合わせて差し込み、時計方向へ 45° 回転させ、ミキシングチップを確実に装着します。

4. アクセスタップの装着



微細な部分にレジン注入する際は、付属のアクセスタップをミキシング部先端へ確実に差し込みます。装着後、アクセスタップが確実に固定されていることを確認してください。

5. 排出

シリンジのプランジャー部を押して、レジンを出します。

6. ミキシングチップの取り外し

ミキシングチップの装着と逆の方法で、ミキシングチップをシリンジから取り外します。(この際ジョイント部からレジンが逆流する場合がありますので、衣服などに付着させないように注意してください。)

7. キャップの取り付け

シリンジのキャップの取り外しと逆の方法で、キャップをシリンジへ取り付けます。この際、シリンジの抽出口にベース及びキャタリストが付着している場合は、ティッシュペーパーなどで拭き取ってからキャップを装着してください。ベース及びキャタリストが触れた状態でキャップを取り付けると、シリンジ内でレジンが硬化することがありますので、十分注意してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①ミキシングチップ及びアクセスタップは1患者 1 個の使用とし、他の患者への使いまわしはしないこと。
- ②ミキシングチップ内でレジンが硬化した後にプランジャー部を無理に操作しないでください。シリンジの破損を起こすことがあります。
- ③使用後のミキシングチップは「廃棄物に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②使用中に誤飲させないように注意すること。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】*

ペントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17

TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】

ペントロン クリニカル (アメリカ合衆国)

(Pentron Clinical)