


ミキシングチップ

【禁忌・禁止】

本品は、一度使用したもの、血液や唾液に触れたものを再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

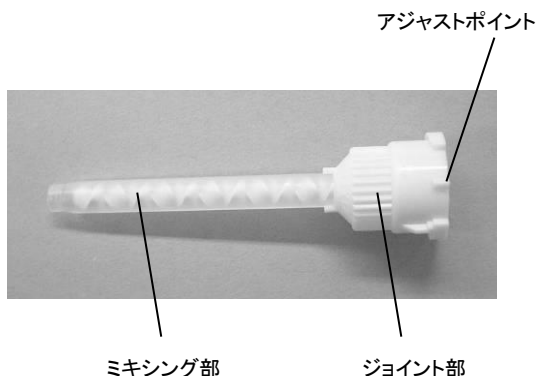

【使用目的又は効果】

カートリッジに充填された2ペースト[ベースペースト(基材)、キャタリストペースト(硬化材)]のシリコーン印象材及びレジンの練和

【効能又は効果】


2ペーストの材料を容易に練和することができる。

【効能又は効果に関連する使用上の注意】

ペントロン社製カートリッジに装着できるよう設計されているため、その他の規格のカートリッジには装着できないので、注意すること。

【使用方法等】

1. カートリッジのキャップの取り外し

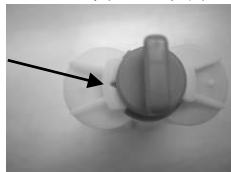

カートリッジのキャップを反時計方向に45°回転させ、カートリッジに付与されたきざみ部とキャップの突起部(左図→部)を合わせて引き抜きます。

2. ミキシングチップ取り付け準備



練和紙上に少量のシリコーン又はレジンを出し、ペースとキャタリストが等量出ていることを確認します。(等量出ている場合、硬化不良及び適正な効果が得られない場合がありますので注意してください。)

3. ミキシングチップの装着



カートリッジに付与されたきざみ部とミキシングチップのジョイント部にあるアジャストポイントを合わせて差し込み、時計方向へ45°回転させ、ミキシングチップを確実に装着します。

4. 排出

ディスペンサーガンを操作し、シリコーン又はレジンを排出します。

5. ミキシングチップの取り外し

ミキシングチップの装着と逆の方法で、ミキシングチップをカートリッジから取り外します。(この際ジョイント部からシリコーン又はレジンが逆流する場合がありますので、衣服などに付着させないように注意してください。)

6. キャップの取り付け

カートリッジのキャップの取り外しと逆の方法で、キャップをカートリッジへ取り付けます。この際カートリッジの抽出孔にベース及びキャタリストが付着している場合は、ティッシュペーパーなどでふき取ってからキャップを装着してください。ベース及びキャタリストが触れた状態でキャップを取り付けると、カートリッジ内でシリコーン及びレジンが硬化することがありますので十分注意してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①ミキシングチップは1患者1個の使用とし、他の患者への使いまわしはしないこと。
- ②ミキシングチップ内でシリコーン及びレジンが硬化した後にディスペンサーガンを無理に操作しないでください。ディスペンサーガン及びカートリッジの破損を起こすことがある。
- ③使用後のミキシングチップは「廃棄物に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②使用中に誤飲させないように注意すること。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】*

ペントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17

TEL 03-5746-0316 FAX 03-5746-0320

【製造元】

ペントロン クリニカル (アメリカ合衆国)

(Pentron Clinical)