

機械器具65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (JMDN コード 38782000)


ディスペンサーガン

【形状、構造及び原理等】

〔種類〕

- ディスペンサーガン (50mL カートリッジ用)
- ディスペンサーガン (25mL カートリッジ用)

〔各部の名称〕

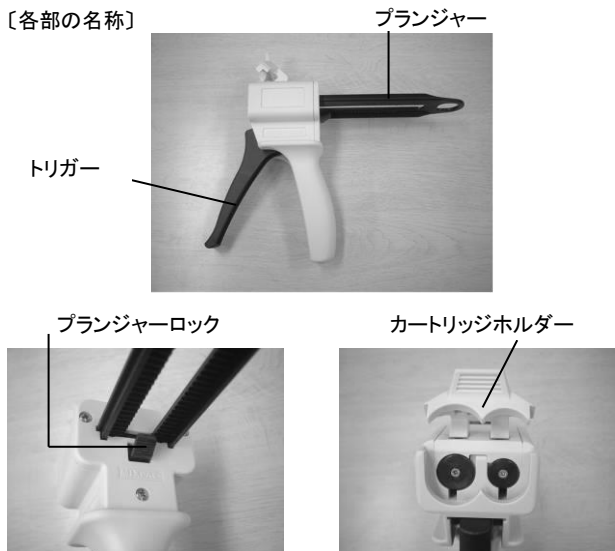

【使用目的又は効果】

カートリッジに充填された、2ペースト[ベースペースト(基材)、キャタリストペースト(硬化材)]のシリコーン印象材及びレジンを手動により抽出するための器具である。

【効能又は効果に関連する使用上の注意】


カートリッジ排出口でカートリッジ内の内容物が硬化している場合、無理にトリガーを操作すると、カートリッジの破損及びディスペンサーガンの破損を生ずることがあるので、十分注意すること。

カートリッジのサイズに合ったディスペンサーガンを必ず使用すること。

【使用方法等】

1. カートリッジの取り付け

プランジャーロックを押し上げ、プランジャーを一番後方へ引きま

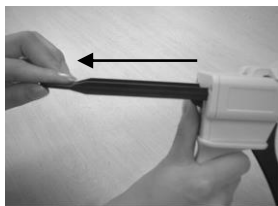

す。カートリッジホルダーを上げ、カートリッジを装着します。



カートリッジホルダーを下げ、カートリッジを確実に固定します。



2. 排出

本体のトリガーを操作し、カートリッジからシリコーン印象材及びレジン



3. カートリッジの取り外し

カートリッジの取り付けの逆の方法でカートリッジを外します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②機器に異常がないようことを絶えず監視すること。
- ③機器に異常が発見された場合は、速やかに機器の使用を中止するなど、適切な措置をとること。
- ④故障した際は適切な表示を行い、専門家による修理完了までは使用しないこと。
- ⑤患者の手に触れないようにすること。
- ⑥機器は勝手に改造しないこと。
- ⑦歯科医療有資格以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、直射日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】*

ペントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17

TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】

ペントロン クリニカル (アメリカ合衆国)

(Pentron Clinical)