


機械器具65 歯科充填器  
歯科用充填・修復材補助器具 (JMDN コード 38782000)  
**ディスペンサーガン(4mL シリンジ用)**  
〔5mL シリンジ兼用〕

【形状・構造及び原理等】

1) 概要

本品はペントロンジャパン社取扱い 4mL 及び 5mL シリンジ(練和比 1:1)に充填された材料を等量注出する充填・修復材補助器具である。

2) 外観

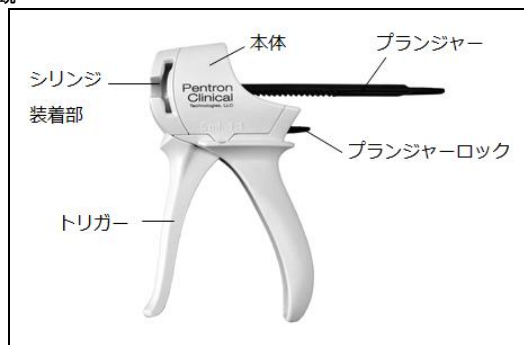

3) 原理

シリンジを取り付ける本体と、シリンジ内の材料を押し出すプランジャーで構成され、本体のトリガーを操作することでプランジャーが前進し、シリンジ内の材料を等量注出することができる。

【使用目的又は効果】

4mL 及び 5mL シリンジに充填された、2 ペースト〔ベースペースト(基材)、キャタリストペースト(硬化材)〕の材料を手動により注出するために用いる。

【使用方法等】

1) シリンジのプランジャーを取り外す。

シリンジに装着されているプランジャーを製品の長軸方向後方へゆっくりと引き抜きます。



2) シリンジの装着

プランジャーロックを押し上げ、プランジャーを最後方へ引きます。



シリンジ装着部のガイドに沿ってシリンジを本体へ装着します(カチッと音がするまで挿入してください)。



挿入方向      装着完了

3) 排出

本体のトリガーを操作して、シリンジ内のペーストを排出します。  
シリンジの操作方法は、製品の添付文書をご参照ください。

4) シリンジの取り外し

プランジャーロックを押し上げ、プランジャーを最後方へ引きます。

シリンジの装着方向とは逆の方向へスライドさせて、シリンジを取り外します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ①本品にシリンジを装着する際は、予めシリンジに装着されているプランジャーを取り外すこと。
- ②シリンジ排出口でシリンジ内の内容物が硬化している場合は、無理にトリガーを操作すると、シリンジの破損及び本品が破損することがあるので、注意すること。
- ③本品はペントロン ジャパン社取扱い 4mL 及び 5mL シリンジ(練和比 1:1) 以外は装着しないこと。

【使用上の注意】

- ①【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②本品に異常がないことを絶えず監視すること。
- ③本品に異常が発見された場合は、速やかに機器の使用を中止するなどの適切な措置をとること。
- ④本品が故障した際は適切な表示を行い、専門家による修理完了までは使用しないこと。
- ⑤本品が患者の手に触れないようにすること。
- ⑥本品を勝手に改造しないこと。
- ⑦歯科有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・水圧、温度、湿度、風通し、直射日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】\*

ペントロンジャパン株式会社  
〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17  
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】

ペントロン クリニカル(アメリカ合衆国)  
(Pentron Clinical)