

プロスペクト・コンパクト

【警告】

- ・添付文書及び取扱説明書をよく読み、十分な経験を積んだ有資格者以外は本品の操作を行わないこと。
- ・アームを伸ばした状態で本品を移動しないこと。転倒の恐れがある。
- ・患者及び術野の上では、バランス調整やアクセサリーの交換を行わないこと。
- ・電源ケーブルは、必ずアース付コンセントに接続すること。
- ・レーザーを使用する際は、レーザー光が術者及び患者の眼に照射されないよう、十分注意すること。
- ・LEDランプ照度の設定が高い場合、焦点距離が短い場合、照野径が視野より大きい場合に、患者組織が過熱する恐れがあるので、ランプ照度は必要最低限に設定すること。

【禁忌・禁止】

- [不具合・有害事象の発生の恐れがある。]
- ・本品の故障修理は、当社が認定した技術者のみが行うこと。
- ・当社が動作確認した機器以外の機器、装置および部品を本品に接続しないこと。


【形状・構造および原理等】

1. 構成

本品は、顕微鏡本体とベースにより構成されます。
本品はセット又は保守・メンテナンス等の必要に応じて構成部品を単独で輸入、販売することがあります。

商品コード	構成部品名
PPC-2101	プロスペクト・コンパクト 2101

2. 外観・寸法

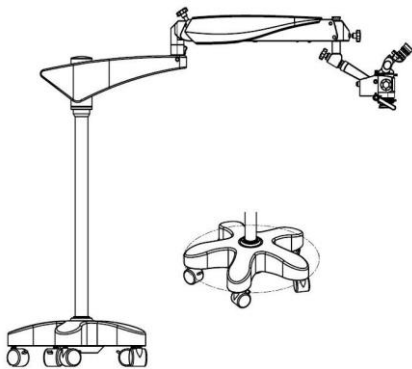

寸法 : 全高 1496mm、ベース直径 630mm
第 1 アーム長さ(軸間距離) 409mm
第 2 アーム長さ(軸間距離) 678mm
サポートアーム長さ(軸間距離) 211mm
重量 : 98 kg
電気的定格: AC 110-220V±10% 50/60Hz 40W
電撃に対する保護の形式: クラス I 機器

仕様 : 顕微鏡本体

倍率: 5 段階
接眼レンズ: 12.5 倍
対物レンズ: f=250mm
総合倍率 [倍]: 3.5、5.4、8.5、14.0、21.5
視野径 [mm]: 57.0、38.0、22.8、14.0、9.0
フォーカス機構: 手動式マニュアルフォーカス

【使用目的又は効果】

手術用顕微鏡のうち、天井または壁面等の施設に固定されない機器。

【使用方法等】

〔使用環境条件〕

- (1) 温度: +10°C~+40°C
- (2) 相対湿度: 30%~75%
- (3) 気圧: 700hPa~1060hPa

〔使用方法〕

1. 電源ケーブルをアース付コンセントに接続します。
2. 主電源をONにします。
3. 周囲に接触するものが無いことを確認の上、アームを伸ばし、作業に適した状態に調整し、各固定ノブを締めます。
4. 照明を調整します。
5. フィルターを選択します。
6. 顕微鏡の位置を作業に適した位置に調整します。
7. 倍率の調整をします。
8. フォーカスを調整します。
9. 使用後は、主電源を OFF にします。電源ケーブルをアース付コンセントから抜きます。
10. 周囲に接触するものが無いことを確認の上、アームを折りたたみます。

【使用上の注意】

■設置上の注意

1. 室内の水平かつ堅牢な床に設置して使用すること。
2. 本品に水がかからない位置に設置すること。
3. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含む空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所に設置すること。
4. 傾斜、衝撃、振動(運搬・設置時を含む)など安定状態に注意すること。

■使用前の注意事項

1. 電源ケーブルは、必ずアース付コンセントに接続すること。
2. アースが正しく接続されていることを確認すること。
3. 手術で使用する前に照明が正常に点灯すること、アームの固定状態及び顕微鏡の動作に異常がないことを確認すること。
4. すべてのケーブルの接続が正確、かつ安全であることを確認すること。

■使用中の注意事項

1. 機器全般及び患者に異常が無いことを絶えず監視すること。
2. 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
3. 患者および術野の上で機器の調整やアクセサリーの着脱をしないこと。
4. 顕微鏡が患者および術野の上で使用されている間は、アクセサリーの交換や顕微鏡の再調整をしないこと。
5. 使用中に照明用 LED ランプが切れた場合は、直ちに使用を中止し、LED ランプを交換すること。また、予備の LED ランプは常に準備しておくこと。

■使用後の注意事項

1. 使用後は、主電源を切る。また長期間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。
2. 次回の使用に支障のないように、必ず清掃すること。
3. 保管中は、ダストカバーを被せること。

【保管方法及び有効期間等】

■保管環境条件

1. 温度: -40℃～+55℃
2. 相対湿度: 10%～90%
3. 気圧: 500hPa～1060hPa
調整の整った清浄な室内で保管すること。

■耐用期限

正規の保守点検を行った場合に限り、納入後 8 年[自己認証
(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

■使用者による保守点検事項

1. 使用後は感染に十分注意しながら、血液、体液、組織等の汚れを除去すること。
2. 機器(レンズ部を除く)に付着したほこりは、ブロアーや柔らかいブラシで除去すること。
3. 対物レンズ、接眼レンズに汚れが付着した場合は、市販のカメラレンズ清掃用布やカメラレンズ清掃用紙に精製水または、市販の光学レンズクリーニング液を少量塗布しクリーニングすること。
4. 詳細は取扱説明書に記載されている保守に関する注意事項を遵守すること。
5. 本品に水分、酸、アルカリ、腐食性物質を近づけないこと。また、化学薬品を近くに保管しないこと。
6. 当社認定技術者の指示なく、機械部品にグリースや油を塗布、注入しないこと。
7. 長期間使用しなかった場合は、使用前に機器が正しく正常に機能するかを必ずチェックし、安全確認を行うこと。

■業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
各部の清掃	12ヶ月以内	外装部清掃 光学系清掃
機能及び 安全性確認	12ヶ月以内	・顕微鏡本体及びアクセサリの 固定状況 ・倍率、焦点調節装置の動作 ・ランプの点灯状態と切替え動作 ・アーム、マウントの動作 ・ケーブルその他の破損状態 ・視覚的光軸のずれ ・法定ラベル、連絡先の表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【販売元】

株式会社 白鵬
〒102-0083 東京都千代田区麹町 1-3-23
TEL 03-3265-6252 Fax 03-3263-7315

【製造販売元】*

ペントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】

66 ビジョン テック社 (中国)
(66 Vision Tech Co., Ltd.)