

機械器具65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 (JMDN コード 70718000)


ディスペンサーガン (カプセル用)

【形状・構造及び原理等】


1) 概要

本品は自社取扱い「ヴェリコム Well pulp PT [認証番号: 231AKBZX00014000 号]」のカプセルに充填された材料を排出する充填・修復材補助器具である。

2) 外観

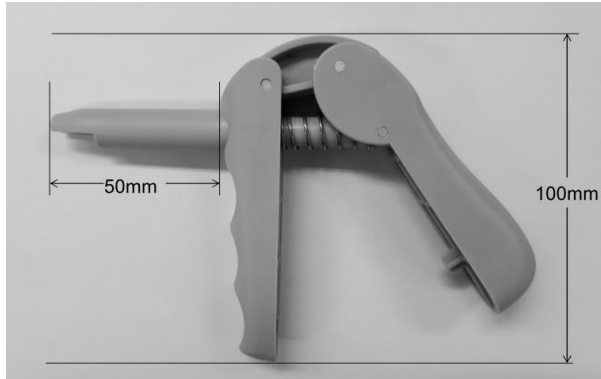

対応カプセルサイズ

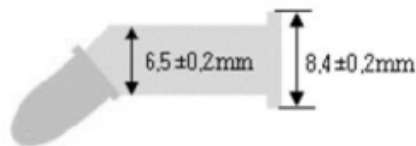

3) 原理

カプセルに充填された材料を排出する充填・修復材補助器具である。カプセルを取り付ける本体と、カプセル内の材料を押し出すプランジャーで構成され、本体のトリガーを操作することでプランジャーが前進し、カプセル内の材料を排出することができる。

【使用目的又は効果】

歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる器具。

【使用方法等】

【使用方法】

- ①カプセルを本体へ確実に装着し、先端のキャップを取り外します。
- ②本体のトリガー部分をゆっくり操作し、適量のペーストをカプセルから押し出します。
- ③カプセルを取り外し、清掃後、保管します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①排出口でカプセル内の内容物が硬化している場合は、無理にトリガーを操作すると、破損及び本品が破損することがあるので、注意すること。
- ②本品は自社取扱い「ヴェリコム Well pulp PT [認証番号: 231AKBZX00014000 号]」以外を装着しないこと。
- ③長時間消毒薬液中に放置しないこと。
- ④加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器など)による滅菌処理はしないこと。
- ⑤洗浄、消毒後の本品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となることがある。

【使用上の注意】

- ①【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②本品に異常がないことを絶えず監視すること。
- ③本品に異常が発見された場合は、速やかに機器の使用を中止するなどの適切な措置をとること。
- ④本品が故障した際は適切な表示を行い、専門家による修理完了までは使用しないこと。
- ⑤本品が患者の手に触れないようにすること。
- ⑥本品を勝手に改造しないこと。
- ⑦歯科有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・水圧、温度、湿度、風通し、直射日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

ベントロンジャパン株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】

デンタルフォーラム(国内)