

ソムノデント AVANT


【形状、構造及び原理等】**

1. 構成品*

構成品は次のとおり。構成品は単体で販売することがあります。

名称	数量	備考
上顎用スプリント	1 個	本体
下顎用スプリント	1 個	
ストラップ	1 セット	
保管容器	1 個	付属品
エラストックゴム	1 袋(100 個)	別売品


2. 各部の名称

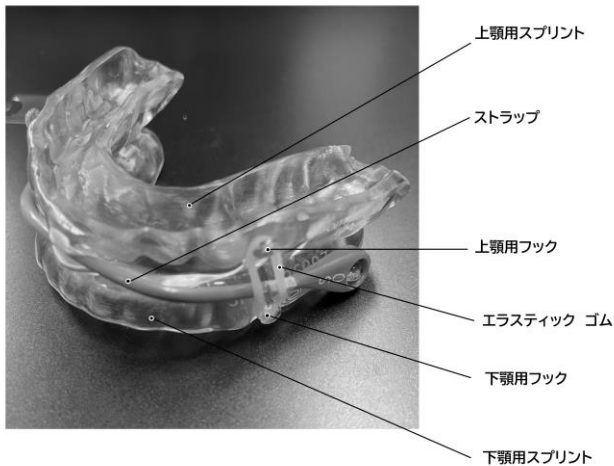

3. 原材料

PMMA、その他

4. 寸法

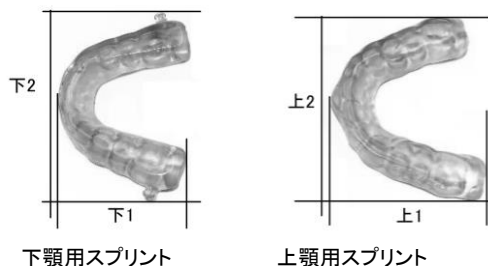

スプリント	上顎	下顎	ストラップ(S)
2:幅(歯列幅)	75±25 [mm]	73±25 [mm]	70±25 [mm]
1:長さ(臼歯降端から前歯先端)	60±20 [mm]	58±20 [mm]	50±20 [mm]

エラストックゴム 直径	4.8 [mm]	6.4 [mm]
-------------	----------	----------

5. 原理

本品は、上顎用スプリントと下顎用スプリントにストラップを装着することで、上下顎装着時に下顎を前進させ固定し、咽頭空間を確保する。

【使用目的又は効果】

損傷した身体部位を固定するために用いる器具をいう。
身体に合うよう形造る。

【使用方法等】**

- ① 上顎用スプリントの前方部の装着を行う。
- ② 上顎用スプリントの後方部の調整装着を行う。
- ③ 最適な下顎前方位を設定し、維持固定する。
- ④ 脱着は下顎スプリントを外し、その後上顎を外す。
- ⑤ ストラップを交換することで、下顎の位置を後方に 1mm、前方に 8mm 調整することができる。

※エラストックゴムは必要に応じて上下フックにかけて使用する。

【使用上の注意】**

- 1) 使用注意
- ① 【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ② 使用前に本品に破損、傷、欠け等の異常がないことを確認すること。異常が確認された場合は使用しないこと。
- ③ 本品に異常が発見された場合は、速やかに機器の使用を中止するなど適切な措置をとること。
- ④ 本品加工物はカスタムメイドであるため、また、感染防止のため、共有しないこと。
- ⑤ 本品加工物は、使用前後に必ず洗浄すること。洗浄する際は、45℃以下の水、歯ブラシを使用し、歯磨き粉、アルコール、アルコールベースのクリーナー、熱湯を絶対に使用しないこと。
- ⑥ 本品を勝手に改造しないこと。
- ⑦ 超音波洗浄器は使用しないこと。
- ⑧ 本品の装着後のコーヒー、お茶、コーラなど色のついた飲み物を取らないこと。色の沈着を避けるため。
- ⑨ (アマルガムなど) 歯の詰め物や口内炎治療薬によっては、本品に部分的な着色が見られますが、装置の品質には影響ありません。
- ⑩ エラストックゴムは、一度使用したものを再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

- ① 50℃以上の場所、45℃以上のお湯の中での保管はしないこと。(変形の恐れがある。)
- ② 水圧、温度、湿度、風通し、直射日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ③ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- ④ 日常の保管は装置の唾液などを歯ブラシで取り除いて、装置全体が、浸漬する程度の水道水を入れた容器の中に保管すること。
- ⑤ 一週間に1から2回洗浄剤を用いて数分間洗浄すること。洗浄剤によっては、数時間浸漬すると匂い、着色が起きるので洗浄剤の使用説明、注意事項に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

ベントロンジャパン株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【販売元】

ソムノデント ジャパン株式会社
TEL. 03-5743-7608 FAX. 03-5746-0320