


機械器具(49)医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用ファイル(JMDN コード 31878021)

D パーフェクト SS

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

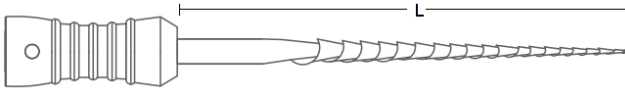

(図は、H ファイルのイメージ)

単位[mm]

構成品名	種類	オペラティブ 長さ (L)
D パーフェクト SS (K ファイル)	#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30,#35, #40,#45,#50,#55,#60,#70,#80, #90,#100,#110,#120,#130,#140, #15-40,#45-80,#08-15,#06-10, #08-10,#06-25,#90-140	21, 25, 28, 31
D パーフェクト SS (C-V ファイル)	#6,#8,#10,#12,#15,#20, #06-10,#08-15,#ASSTD	18, 21, 25
D パーフェクト SS (C ファイル)	#6,#8,#10,#12,#15,#20, #06-10,#08-15,#ASSTD	18, 21, 25, 28, 31
D パーフェクト SS (H ファイル)	#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30,#35, #40,#45,#50,#55,#60,#70,#80, #90,#100,#110,#120,#130,#140, #15-40,#45-80,#08-15,#06-10, #08-10,#06-25,#90-140	21, 25, 28, 31
D パーフェクト SS (リーマーファイル)	#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30,#35, #40,#45,#50,#55,#60,#70,#80, #15-40,#45-80,#08-15,#90,#100, #110,#120,#130,#140,#90-140	21, 25, 28, 31
D パーフェクト SS (ブローチ)	#00,#01,#02,#03,#04,#05,#06, #00-06, #02-04,#01-06,#ASSTD	21, 25, 28

ハンドルの色:ファイル

表示	#6	#8	#10	#15	#20	#25	#30	#35	#40	#45	#50	#55	#60	#70	#80
色	桃	灰	紫	白	黄	赤	青	緑	黒	白	黄	赤	青	緑	黒

表示	#00	#01	#02	#03	#04	#05	#06
色	紫	白	黄	赤	青	緑	黒

表示	#90	#100	#110	#120	#130	#140
色	白	黄	赤	青	緑	黒

〔材質〕

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

上下方向の往復運動又は引き上げ動作による切削・研磨で根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる。

【使用方法】

- 1) 根管の太さに合わせて適切なサイズを選択します。
- 2) 手動により上下方向の往復運動又は引き上げ動作により、根管形成を行う。
- 3) 本品の使用前後は、次の手順で、洗浄、滅菌を行います。
 - ① 附着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - ② 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。
 - ③ 消毒液から取り出して水洗し、完全に乾燥させます。
 - ④ 滅菌は、オートクレーブ(134℃、10 分)を推奨します。

〔操作方法に関連する操作上の注意〕

- ・ 本品使用時は、必ず滅菌すること。
- ・ 本品の滅菌には、化学薬品を使用しないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ② 本品に異常がないようことを絶えず監視すること。
- ③ 本品に異常が発見された場合は、速やかに機器の使用を中止するなど、適切な措置をとること。
- ④ 本品は、患者の手に触れないようにすること。
- ⑤ 本品は勝手に改造しないこと。
- ⑥ 歯科医療有資格以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ・ 本品の仕様により発疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、直射日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

ベントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17

TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】

Shanwei Perfect Medical Instruments Co., Ltd. (中国)

(シャンウェイ パーフェクト メディカル インストルメンツ社)