



* 2017年 7月 (第7版 新記載要領に基づく改訂)
* 2016年 2月 (第6版)

承認番号：22100BZX00625000

器30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用ワイヤ・結さつ糸パサー 32864002

レトリバー

(シャトルリレー)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 併用医療機器

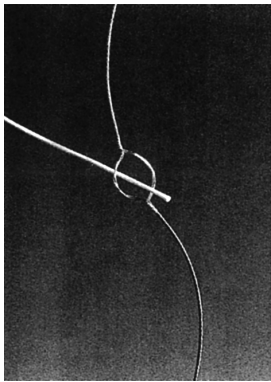
- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと [相互作用の項参照]

2. 禁止

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止 [開封した場合、未使用でも再滅菌使用不可]

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

製品名	製品外観	材質
シャトル リレー		ステンレス鋼

原理等

- ・シャトル リレーは、縫合糸を用いて、軟部組織の関節内縫合を可能にする。このシステムにより、関節包前方、関節唇の関節鏡下修復術、ロテーターカフ、SLAPリージョン、二頭筋腱固定術、半月板修復、剥離した前十字靭帯の再付着などのある特定の整形外科的手術手技において、効果的な進入ができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・軟部組織の関節内縫合を行う器械である。

**【使用方法等】

使用方法

- ・鏡視下での軟部組織修復に際して、スーチャーパンチあるいはスーチャーフックと合わせて使用することにより、より糸の使用を可能とする。
- ・詳細はカタログを参照すること。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

滅菌

- ・滅菌包装を開封した製品は、再使用しないこと。
- ・使用後は医療廃棄物として処理すること。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと [専用品でない設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある]。

3. 不具合・有害事象

その他の不具合・有害事象

以下の有害事象が発現する可能性がある。

- ・組織、靭帯、腱、神経、血管、骨等の損傷
- ・感染症
- ・金属アレルギー

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- ・高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所にて保管すること。

有効期間・使用の期限

- ・外箱に記載した表示を参照 [自己認証による]。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社

電話番号：03-6402-6600（代）

主たる設計を行う製造業者：

Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。