

ライトパターンR

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[適用対象(患者)]

- ・本材の用いられた成分又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある人などには使用しないこと。

[併用医療機器]


- ・他社製品との併用をしないこと。

[使用方法]

- *・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

* [形状] シート状

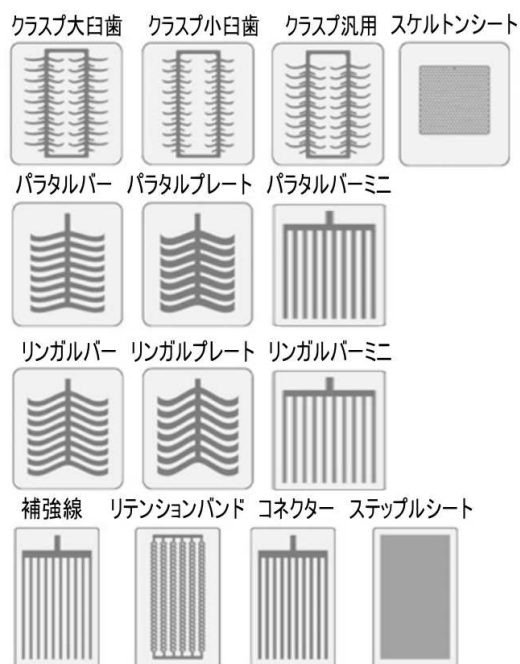

[構造] 光重合レジン(可視光線用)

[原理] 可視光線により重合

【使用目的又は効果】

- 修復物等の製作に用いる既製パターン
- ・床、パー、クラスプ等の鋳造に用いる。

【使用方法等】

「局部義歯」の一例

- 1) 通法に従いワックスでリリーフ及びブロックアウトを行う。
- 2) 粘膜部、歯牙及び維持部に分離材を塗布する。
- 3) ステップル又はパー部材を圧接し、余剰部分をカットし、光重合器で仮重合する。
- 4) スケルトン・クラスプ部を圧接し、連結部にキュアボンドを塗布し、光重合器で仮重合する。
- 5) フィニッシングラインを圧接し、キュアボンドで固定する。
- 6) スプルー植立位置に材料の余剰分にてスプルーコーンを形成し植立すると同時に必要に応じて補強する。

- 7) 光重合器(可視光線)にて本重合する。

- 8) 模型からフレームを取り外し粘膜面を約 10 秒照射後、再び模型に収める。

- 9) 重合完了後、作業模型上でスプルーコーン部にワックス・スプルーを植立する。

- 10) Co-Cr 合金での作成時はメーカー指示の耐火模型製作時の混液比でリング埋没すること。

【使用上の注意】

[使用方法]

- 1) 保護具を着用し眼に接触しないよう、又は吸入を避けること。
- 2) ライトパターンRは自然光、室内光でも光硬化するので、製品部分をシートから剥がす時以外は必ず付属のアルミパックに戻し遮光すること。
- 3) ステップルシートの両面には「透明剥離シート」が貼ってあるので、使用前に必ず剥がすこと。
- 4) 本品の使用環境は25℃前後である。
寒冷時は硬くなり折れやすくなるので、概ね人肌に温めてから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

****・本材は、高温にて軟化し形状崩れを起こすこともありえるため、必ず付属のアルミパックに入れて35℃以下で保管のこと。**

- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

[有効期間]

****・包装に記載のとおり [自己認証(当社データ)による]**

※ (例 Exp 2020-04: 有効期間 2020 年 4 月を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: シージーケー株式会社

住所: 〒738-0512

広島市佐伯区湯来町白砂 95-7

T E L: 0829-86-2061