

歯 03 義歯床材料
一般医療機器 歯科用パターンレジン JMDN 70833000

セレック・アドオンパテ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[適用対象]

****・本品に用いられた原材料成分又は類似成分に対して発疹、
皮膚炎等の過敏症の既往歴のある方は使用しないこと。**

[併用医療機器]


****・他社製品と併用をしないこと。**

[使用方法]

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状] パテ状 青色

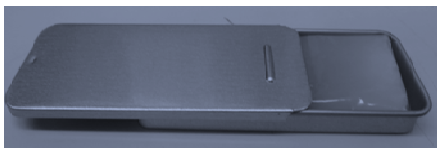

チャック付き袋、スライドケース入り

[構造] 光重合アクリル系レジン

[原理] 可視光線により重合

【使用目的又は効果】

****インプラントの上部構造やクラウンの鋳造用コーピングパターンとして使用するレジン。修復物等の製作に用いる当社製セレパターン等の連結、補正に使用する。**

【使用方法等】

[修復物等の製作に用いる場合]

- 1) セレパターン E X にて重合したパターン上で追加・連結・補正を行う場合には各部に当社製接着剤（キュアボンド）を薄く塗布しておく。

注）未重合のパターンにパテを追加する場合は、直接に接着できるのでキュアボンドは不要。

- 2) インスツルメントに当社製専用器具分離剤を塗布し、適量のセレック・アドオンパテを容器から取り出し、追加・補正を行う部位に圧接して形成する。

※圧接にはポリエチレンフィルムを介して擦るとより綺麗に仕上がる。

- 3) インスツルメントに当社製専用器具分離剤を塗布することで、作業性がよく移行部などを滑らかに形成できる。
- 4) 市販の可視光線重合器にて重合させる。
- 5) パテは冬期に硬い場合は容器を温めるとよい。

※前以てインスツルメントに当社製セレック・ブロックアウトワックスを加熱コーティングしておくとし、器具分離剤の効果が長く持続する。

[インプラント等のコーピングパターンに使用する場合]

- **1) コーピング用パターン製作時の分離剤は当社製分離剤を使用する。**
- 2) インスツルメントに当社製器具分離剤を塗布し、適量のセレック・アドオンパテを容器から取り出し、アバットメント等を圧接形成する、その際ポリエチレンフィルムを介して撫でながら圧接するとよい。
- 3) スプルーはセレック・アドオンパテで適所にスプルーコーンを作り重合してそれにワックス、スプルーを植立するとよい。
- 4) 市販の可視光線重合器で重合する。
- **5) 光重合後のコーピングパターンが外れない場合は約 60℃の温風か温湯で温めると分離剤の皮膜が軟化され外し易い。**
- 6) 大型のパターンの場合には、250℃～300℃で1時間保留後、炉内温度を上昇させること。

【使用上の注意】

[使用方法]

- 1) セレック・アドオンパテは自然光、室内光でも光硬化するので、使用時以外は必ず遮光すること。
- **2) 本材がスライドケースのフタに付着すると、フタが開かなくなるため、袋から取出す際にはみ出さない様に注意すること。**

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- **・本材は必ず付属のアルミパックに入れて 35℃以下で保管のこと。**
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
 - ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

[有効期間]

- **・包装に記載のとおり [自己認証（当社データ）による]**
- ※（例 Exp. 2020-04 : 有効期限 2020 年 4 月を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : シージーケー株式会社

住 所 : 〒738-0512

広島市佐伯区湯来町白砂 95-7

T E L : 0829-86-2061