

管理医療機器
機械器具6 呼吸補助器
酸素治療フローメータ
コード 37132000
フローセクター (品番：PM1000)

JPMF0014

【警告】

使用方法

- ・使用前に必ずボディ本体を回してロックすること。[正常な流量が流れないおそれがある。また、故障の原因となる。]
- ・患者に正しいアウトレットポートから酸素が流れていることを確認すること。[他のアウトレットポートから酸素が流れていると患者に酸素が流れない。]
- ・患者に適用する前に必ず処方流量を確認し、使用中は定期的に流量をモニターすること。[患者が酸素欠乏症になるおそれがある。]

【禁忌・禁止】


併用医療機器「相互作用の項参照」

- ・本品はMR Unsafeであり、MR検査は禁忌とする。

【形状・構造及び原理等】

本品は、流量計と接続して使用され、酸素の供給流出口を3方向に切り替えることのできる装置である。

＜各部の名称＞

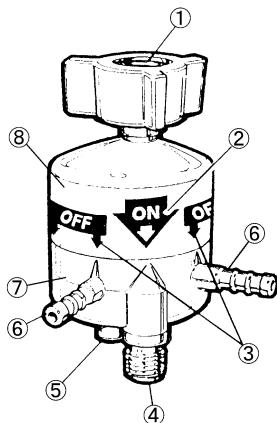

番号	名 称
①	9/16インチメスネジ DISS FEMALE
②	“オン” 矢印
③	“オフ” 矢印
④	9/16インチオスネジ DISS MALE
⑤	ロックボタン (押し上げればロック解除、自動復元)
⑥	チュービングコネクター
⑦	セクター部
⑧	ボディ(本体)

※＜流出口選択部＞

ニップルナット用ジョイント部(9/16インチオスネジ：DISS Male)1カ所、ジョイント部(チュービングコネクター部)2カ所、合計3カ所の流出口のうち、いずれかをロックボタンにより選択する。

【使用目的又は効果】

本品は、医療用酸素を必要とする患者にこれを供給する際に、医療施設内に設置されている酸素供給口に接続して、「酸素供給流量調節」を目的とする流量計に接続する付属品であり、「酸素の供給流出口切り替え」を目的とする装置である。

【使用方法等】

本品は、流量計と組み合わせて使用します。流量計の取扱いに関しては、流量計の添付文書を参照してください。

1. フローセクターのメス側のコネクターを流量計のオス側のコネクターに接続してください。
2. 1台あるいは2台、3台の医療機器(カニューラ、加湿器、ネブライザー等)をフローセクター(チュービングコネクターあるいはオス側のコネクター)に取り付けてください。
注：流量は“オン”の矢印で選択された方向にのみ流れ、“オフ”の矢印の方向には流れません。
3. ロックボタンを上にし“オン”の矢印を希望するアウトレットポートが合わさるようにセクター部を回してください。“オフ”の矢印は他の使用しない2つのポートに並びます。
注：使用前に必ずボディ本体を回してロックしてください。
注：流量計を作動したら、患者に正しいアウトレットポートから酸素が流れているか確認してください。
4. ロックボタンを下げてボディ本体にロックしてください。
5. 流量計を稼働させてください。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

ご使用になる前に以下の点を確認すること。

- ・希望するアウトレットポートにセットされていること。
- ・ボディ本体とロックされていること。

※使用中はオイル、グリース、その他可燃性物質は製品に近づけないこと。[爆発又は火災の危険性がある]

【使用上の注意】

※※ [相互作用(他の医薬品・医療機器との併用に関すること)]

・併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)	本品と併用しないこと。	本品はMR Unsafeである。

【保管方法及び有効期間等】

※※＜保管の条件＞

- ・直射日光の当たらない、塵埃を避けた清浄な場所にて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-3751

■外国製造所

プレジジョンメディカル社
(Precision Medical, Inc.)
アメリカ

お問い合わせ先



株式会社 インターメド ジャパン

TEL:06-6222-1951