

機械器具6 呼吸補助器
高度管理医療機器 ガス式肺人工蘇生器 コード 13366000
ネオティー Tピース蘇生システム (フェイスマスク)

再使用禁止


JMMF0112

【禁忌・禁止】

- 使用方法
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

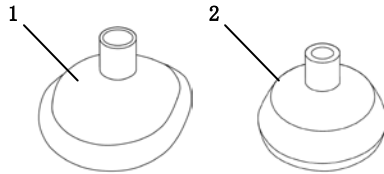

- 1:クリアフェイスマスク(ポリ塩化ビニルタイプ)、
2:シリコンフェイスマスク(シリコンタイプ)

2. 材料

フェイスマスクはポリ塩化ビニル製またはシリコンゴム製である。

3. 種類

品番	仕様
10-50504AW	クリアフェイスマスク (ポリ塩化ビニルタイプ、乳児用)
10-50505AW	クリアフェイスマスク (ポリ塩化ビニルタイプ、新生児用)
10-50601AW	シリコンフェイスマスク (シリコンタイプ、サイズ0)
10-50602AW	シリコンフェイスマスク (シリコンタイプ、サイズ1)

4. 原理

ネオティー Tピース蘇生システムの本体に接続し、患者にガスを供給する。

【効能又は効果】

酸素供給ラインに接続し、無呼吸または不十分な呼吸を呈する新生児・乳児の換気または補助換気に用いる装置である。

【使用方法等】

1. 使用前確認

- ・ポリ塩化ビニルタイプのマスクのカフは膨らんでいること。
- ・マスクに破損や歪みがないこと。

2. 処置

- (1)ネオティー Tピース蘇生システムの本体をフェイスマスクに接続し、フェイスマスクを患者の口・鼻にあてる。
- (2)病院のプロトコールに従って、必要な処置を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・使用中に患者を放置しないこと。
- ・酸素供給ラインの流量を調整すると、本品使用時の最大吸気圧および呼気終末陽圧が影響を受けることに注意すること。
- ・流量が15LPMを超えないようにすること。推奨される流量の範囲は5～15LPMである。
- ・本品を消毒しないこと。
- ・本品の使用中は常時酸素濃度をモニタすること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・蘇生処置を最優先で行うこと。ネオティー Tピース蘇生システムが直ちに使用できない、あるいは効果的に使用することができない場合や、酸素供給ラインから望ましい流量が得られない場合には他に実施可能な蘇生処置を試みることに。

【保管方法及び使用期間等】

＜保管方法＞

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス

※大阪府中央区道修町1-6-7 TEL：06-6222-3751

■販売業者(お問い合わせ先)

エア・ウォーター株式会社 医療カンパニー 医療機器部
東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 TEL：03-3578-7810

■外国製造業者

※マーキュリー メディカル
(Mercury Medical) アメリカ合衆国

株式会社ジェイエスエス