

ユニマックス ウンドリトラクタ

再使用禁止

JUXF0020

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 形状

全体図

1) クイックガードタイプ



2) 巻き込みタイプ

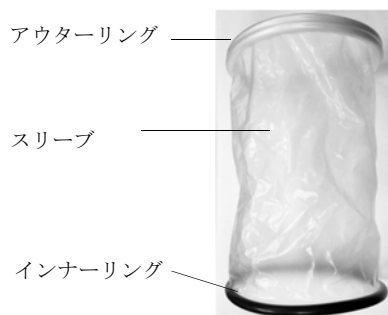

2. 原材料

固定リング：ABS樹脂

スリーブ：ポリウレタン

インナーリング、抜去リング：熱可塑性ポリウレタン

インナーリング（胸部用（注））：ポリ塩化ビニル

抜去ストラップ：ポリエチレン

注）主として胸部に使用する。

3. 原理

インナーリングを創部から挿入し、体内にスリーブを固定・保持することにより、臓器又は組織へのアクセスを可能にする。

【使用目的又は効果】

創部等を広げて保持するために用いる。臓器又は組織の露出やアクセスによって検査又は治療を可能にする。

【使用方法等】

(クイックガードタイプ)

1. 施設の手順に従い本品を留置する創を切開する。
2. 本品を包装から取り出す。
3. インナーリングを曲げ、切開部から挿入し、リングが体内で均等に広がるよう調整する。
4. インナーリングが確実に切開部の体内側に密着するまでスリーブをゆっくり上に引き上げる。その後、スリーブを保

持した状態で、固定リングを切開部の体表側に確実に密着するまでゆっくりとスライドさせる。

5. 固定リングの少し上でスリーブを切断する。
6. 必要な手術を開始する。
7. 手術後、抜去リングをゆっくり引いてインナーリングを切開部から取り外す。
8. 本品を取り除いた後、切開部周辺の止血確認を行う。

(巻き込みタイプ)

1. 施設の手順に従い本品を留置する創を切開する。
2. 本品を包装から取り出す。
3. インナーリングを曲げ、切開部から挿入し、リングが体内で均等に広がるよう調整する。
4. インナーリングが確実に切開部の体内側に密着するまでスリーブをゆっくり上に引き上げる。その後、アウターリングを切開部の体表側に確実に密着するまでスリーブを巻いていく。
5. 必要な手術を開始する。
6. 手術後、インナーリングを切開部から取り出す。
7. 本品を取り除いた後、切開部周辺の止血確認を行う。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品と鋭利な器具類との接触は避けること [本品の破損の恐れがある]。
- ・本品に無理な力を加えないこと [本品の破損、術者や患者に損傷を与える危険性がある]。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存すること。

[有効期間]

- ・包装の使用期限欄を参照 [自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス

大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-3751

■外国製造業者

ユニマックスメディカルシステムズ

(Unimax Medical Systems Inc.)

台湾

株式会社ジェイ エス エス