

タイタンヘッドライト

JSOF0063

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・可燃性の麻酔薬がある場所では使用しないこと。[爆発の危険がある。]
- ・ドレープ等の可燃性のものに高輝度光面が直接接触または至近距離まで近づけないようにすること。[発火、火傷の恐れがある。]
- ・使用中、ファイバーオプティックケーブル又はヘッドライトの先端を直接目に向けないこと。[器具が放つ強光によって、目に障害が生じるおそれがあるため。]
- ・使用中、ヘッドライトのファイバー接続部からファイバーオプティックケーブルを外さないこと。[器具が放つ強光によって、目に障害が生じるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

本品は別売のヘッドバンド及びファイバーオプティックケーブルと組み合わせることで光源装置と接続して使用するヘッドライトである。


※1. 構成

本品は、以下のように組み合わせて使用する。

例)ヘッドライトセット

[各部名称]

・通常タイプ

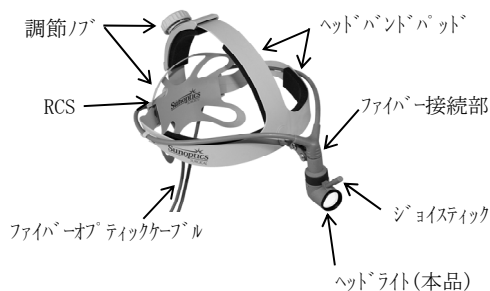

・スポーツタイプ



2. 原理

光源装置から供給された照明光を光ファイバーを経由しヘッドライトへ送り、レンズにて円形の照射野を術野に投入する。

【使用目的又は効果】

手術者の頭部に装着するよう設計された装置(ランプ)をいう。バンド又はヘルメットフレームに取り付けて手術者の前頭部に配置し、手術、診断、治療中に視野を直接照明するものである。通常、拡大レンズ、反射器、ファイバーオプティックケーブル(冷光の送達又は電池バックからの電源供給用)の接続部から構成される。

【使用方法等】

本品の操作方法又は使用方法については、取扱説明書を参照すること。また、光源装置の取扱説明書も参照すること。

1. ファイバーオプティックケーブル(別売)とヘッドバンド(別売)を本品に接続する。
2. ヘッドライトセットを頭に装着し、調節ノブ又は調節テープにてずれないように固定する。

3. 光源装置(別売)を稼働させた後、ジョイスティック(別売)にてライトの向きを術野に合わせる。
4. 使用後、光源装置の電源を切った後にヘッドライトセットを脱ぎ、ケーブルを抜去する。
5. ジョイスティック(別売)は定められた方法により廃棄する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品を頭部に装着し、電源スイッチをONにする前に、術者の眼を照射することがないように、モジュールの位置を調整してください。[誤って光を直視すると眼に傷害を負わせる恐れがあります。]
- ・フロントレンズ表面は、カメラ用のレンズティッシュで拭いて常に清潔にしておいてください。血液が付着した場合は、アルコールを染み込ませた布で直ちに拭き取ってください。
- ・ヘッドライトは強い衝撃を与えないよう注意して取り扱うこと。
- ・ファイバーオプティックケーブルをヘッドライトから取り外す前に、必ず光源装置の電源スイッチをOFFにすること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- ・水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス

大阪市中央区道修町1-6-7 TEL: 06-6222-3751

■外国製造業者

サンオプティック テクノロジーズ社

(Sunoptic Technologies)

アメリカ

取扱説明書を必ずご参照ください

株式会社ジェイエスエス